

# Opalescence Go™

## Die sanfte Zahnaufhellung FÜR ALLE

Ein Beitrag von Dr. Elisa Jurianz

**ANWENDERBERICHT** /// Eine meiner Patientinnen stellte sich mit dem Wunsch nach helleren Zähnen in meiner Praxis vor. Sie war unzufrieden mit ihrer Zahnfarbe und ganz besonders damit, dass ihre Zähne an den Zahnhälsen bedeutend dunkler waren. Entsprechender Kaffeekonsum spiegelte sich in den Verfärbungen auf den Zahnoberflächen wider. Die Patientin hatte keine Füllungen oder Allergien und zeigte auch sonst keinerlei gesundheitliche Einschränkungen.

Ultradent Products  
Infos zum Unternehmen




Vor der Zahnaufhellung.

Im Vorfeld der Zahnaufhellung wies ich sie auf die Notwendigkeit einer professionellen Zahnreinigung hin, um Verfärbungen und Beläge zu entfernen. Darüber hinaus klärte ich sie über das eventuelle Risiko von auftretenden Sensibilitäten während einer Zahnaufhellung auf. Zahnaufhellungen sind häufig eine ideale Maßnahme für weißere Zähne. Vorhandene Füllungen oder Zahnersatz, wie beispielsweise Kronen und Brücken, werden allerdings nicht aufgehellt.



Anwendung des Upper Tray.

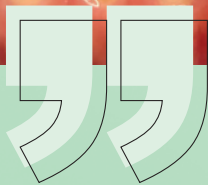

### FEEDBACK der Patientin

„Opalescence Go lässt sich einfach und unkompliziert anwenden, beispielsweise kurz vor einem Event oder während der Autofahrt zum nächsten Termin.“



Nach der Zahnaufhellung  
mit Opalescence Go.

3

### Zahnfarbbestimmung und Produktentscheidung

Zuerst bestimmten wir die Zahnfarbe der Patientin. Diese konnte mit einer A3 (VITA classical A1–D4® Shade Guide) festgelegt werden (Abb. 1). Unter Berücksichtigung der gegebenen Faktoren und der Tatsache, dass die Patientin zunächst eine kostengünstige Einstiegsbehandlung anstrebte, riet ich ihr zu einer Behandlung mit Opalescence™ PF 10% und Opalescence Go™. Aufgrund der einfachen Anwendung und des unkomplizierten Handlings entschied sich die Patientin für die Zahnaufhellung mit Opalescence Go.

Die vorgefüllten Opalescence Go Trays erfordern eine geringe Tragezeit von lediglich 60 bis 90 Minuten. Somit sind sie flexibel anwendbar – auch zwischendurch. Zunächst wurde die Zahnreinigung mittels eines Pulverstrahlgeräts durchgeführt. Anschließend wurde das erste Tray Opalescence Go (Ober- und Unterkiefer) in der Praxis eingesetzt (Abb. 2).

### Hinweise für die Heimanwendung

Die Patientin erhielt neben einer detaillierten Einweisung alle nötigen Informationen für die individuelle Anwendung zu Hause. Wichtig ist beispielsweise, die mit „U“ (Upper) gekennzeichneten Trays in den Oberkiefer und die mit „L“ (Lower) gekennzeichneten Trays in den Unterkiefer einzusetzen. Die Trays werden dann zwei Sekunden angesaugt. Nach der Initialbehandlung und der Einweisung erhielt die Patientin vier gebrauchsfertige Opalescence Go Trays für die Weiterbehandlung zu Hause.

### Erste Anwendungserfahrungen der Patientin

Die Patientin verwendete die ersten beiden Tage jeweils ein Paar Trays. Allerdings traten leichte Empfindlichkeiten auf. Daher pausierte sie anschließend einen Tag nach jeder Anwendung, wodurch die Kälteempfindlichkeit wieder nachließ. Zusätzlich verwendete sie die Opalescence™ Whitening Zahncreme und empfand diese als sehr angenehm.

### Fazit: Zufriedene Patientin

Nach der Anwendung aller Trays kam die Patientin wieder in die Praxis und war mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Tatsächlich konnten die dunkleren Zahnhälse aufgehellt werden und das Endergebnis zeigte durchweg die VITA Zahnfarbe A2 (Abb. 3).

Weitere Informationen zu Opalescence Go auf:

[www.opalescence.com/de/bleaching-to-go](http://www.opalescence.com/de/bleaching-to-go) und

[www.ultradentproducts.com](http://www.ultradentproducts.com)

ANZEIGE

# RÖNVIG SPRITZEN

weil Qualität lohnt sich



**ASPIJECT™** Selbstaspirierende Injektionspritze für die Leitungs- und Infiltrationsanästhesie. Ausbalancierte, komfortabel in der Hand liegende Injektionspritze mit ausgezeichneter Taktilität. Der echte Klassiker nach Dr. Evers.

**PAROJECT™** Injektionspritze für die intraligamentäre Lokalanästhesie (ILA). Kompakte Spritze in Stiffform, mit kontrollierter Abgabe kleiner Dosen für eine langsame Injektion ohne traumatisch wirkenden Injektionsdruck.

- Aus hochgradigem, säurebeständigem und 100% sterilisierbarem Edelstahl
- 5 Jahre Herstellergarantie

Über den Dentalfachhandel erhältlich.

### Mehr Lesen

QR Code scannen  
oder besuchen Sie  
[www.ronvig.com](http://www.ronvig.com)



### Infokontakt

Tel. 0 171 7717937 • [kurtgoldstein@me.com](mailto:kurtgoldstein@me.com)

**RÖNVIG** Dental Mfg. A/S

Gl. Vejlevej 59 • DK-8721 Daugaard • Tel.: +45 70 23 34 11  
E-mail: [contact@ronvig.com](mailto:contact@ronvig.com) • [www.ronvig.com](http://www.ronvig.com)