

P

INTELLIGENTES BISSREGISTRAT STONEBITE

KENNZIFFER 0881

StoneBite wurde ursprünglich von Dreve Dentamid als Spezial-Bissregistrator entwickelt. Aufgrund des optimalen Anwendungskomforts wird es nun von immer mehr Zahnärzten universal genutzt. Zahn-techniker schätzen die sehr gute Schneid- und Fräsbarkeit. Dafür wurde StoneBite mit dem Four-Star-Award ausgezeichnet. Lü-

ckenlose, komfortable Dokumentation am Patienten ermöglicht der HIBC-Code auf jeder Kartusche.

Zudem definiert StoneBite ein neues Preis-Leistungs-Niveau bei den Top-Bissregistralen.

Sparen Sie z.B. mit dem neuen StoneBite Ecopack 20 % der Materialkosten. Zwei Gratis-Dispenser machen für Einsteiger das StoneBite Promopack attraktiv.



DREVE DENTAMID GMBH

Max-Planck-Straße 31
59423 Unna
Tel.: 02303 8807-40
Fax: 02303 8807-55
E-Mail: info@dreve.de
www.dentamid.com

Technische Daten:

- Farbe: Orange
- Endhärte: 51 Shore D
- Verarbeitungszeit: 30 Sek.
- Mundverweildauer

- (inkl. Verarbeitungszeit): 80 Sek.
- Konsistenz: mittel-Typ 2
- Verformung unter Druck: < 2 %
- Rückstellung nach Verformung: 99,9 %
- Lineare Maßänderung: < 0,1 %

P

AIR-SCALER TI-MAX S970 BRINGT KRAFTVOLLE LEISTUNG

KENNZIFFER 0882



Air-Scaler erfreuen sich deswegen einer solch großen Beliebtheit, weil sie ein breites Anwendungsspektrum abdecken und sich dank ihrer einfachen Verwendung auf der Turbinenkupplung durch besondere Flexibilität und schnelle Einsatzbereitschaft auszeichnen. Einsatzgebiete der

luftbetriebenen Zahnsteinentfernungsgeräte (ZEGs) sind zum Beispiel die Zahnsteinentfernung, die Parodontologie oder die Endodontie. Sie sind damit eine interessante Ergänzung oder ggf. Alternative zu Piezo-ZEGs.

Mit dem neuen Air-Scaler Ti-Max S970 – erhältlich für den Anschluss an Turbinenkupplungen der Typen NSK PTL, KaVo® MULTiflex® LUX und Sirona® Schnellkupplung – gelingt es NSK, konstante, kraftvolle Leistung an den Zahn zu bringen und somit auch bei starkem Anpressdruck effiziente Arbeitsergebnisse zu erzielen. Gleichzeitig wurde die maximale Leistung des S970 im Vergleich zum Vorgängermodell um ca. 10 % gesteigert. So ist gewährleistet, dass

in jeder der drei per Power-Control-Ring regulierbaren Leistungsstufen ein verlässliches Oszillationslevel abgerufen werden kann, ohne die sonst bei Air-Scalern übliche Leistungsabnahme in Relation zu einem zunehmenden Anpressdruck wahrzunehmen.

Die NSK Volltitan-Hülse mit DURACOAT-Beschichtung steht für leichtes Gewicht und lange Lebensdauer und der neue Glasstab-Lichtleiter für perfekte Ausleuchtung des Behandlungsfelds. Selbstverständlich ist der S970 sterilisierbar und thermodesinfizierbar. Im Lieferumfang des NSK Air-Scalers S970 enthalten sind drei Scaling-Ansätze (S1, S2, S3), ein Drehmomentschlüssel für sicheres Anbringen der Ansätze sowie ein Aufsatzschutz.

NSK EUROPE GMBH


Elly-Beinhorn-Straße 8
65760 Eschborn
E-Mail: info@nsk-europe.de
www.nsk-europe.de

P

330 CM WOW-EFFEKT

KENNZIFFER 0883

EasyCord setzt neuen Standard unter den nicht imprägnierten Retraktionsfäden. Der integrierte Cutter mit Fadenfixierer sorgt

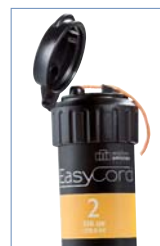

Das spezielle Strickdesign generiert eine 30% höhere Flüssigkeitsaufnahme als andere Markenprodukte und das in Highspeed.

EasyCord ist ab sofort mit 330 cm Inhalt (+ 30 %) zum gleichen attraktiven Preis erhältlich.

für ein einfaches Handling sowie hygienisches und sparsames Dosieren. Jeder Zentimeter EasyCord bewirkt einen Wow-Effekt.

Überzeugen Sie sich selbst und erleben Sie den Wow-Effekt auf unserer Website www.mueller-omicron.de

MÜLLER-OMICRON GMBH & CO. KG

Schlosserstraße 1
51789 Lindlar
Tel.: 02266 474215
Fax: 02266 3417
E-Mail: info@mueller-omicron.de
www.mueller-omicron.de

* Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.

P **PRODUKTLINIE BEAUTIFIL FLOW PLUS**

KENNZIFFER 0891

Mit der Produktlinie Beautifil Flow Plus stellt SHOFU Dental die Indikationserweiterung für Flowables auf den okklusionstragenden Seitenzahnbereich vor.

Das Entwicklungskonzept von Beautifil Flow Plus basiert auf der Erzielung möglichst hoher mechanischer Kennwerte unter Beibehaltung der für Flow-Materialien typischen einfachen Handhabung. Beautifil Flow Plus steht in einer injektionsfähigen, aber absolut standfesten Variante „F00“ (Zero Flow) und einer moderat fließfähigen Variante „F03“ (Low Flow) zur Verfügung. Beide können in den bekannten Flow-Indikationen, aber auch für die Füllungstherapie im Front- und Seitenzahnbereich eingesetzt werden.

Als wesentliche Innovation ist die Freigabe dieser Flow-Materialien für okklu-



sionstragende Klasse I- und II-Restaurationen anzusehen. Die physikalische Basis für diese Indikationserweiterung sind die gegenüber dem klassischen Beautifil Flow um mehr als 50 Prozent erhöhte Dehngrenze (F00: 121 MPa, F03: 115 MPa) und um fast 30 Prozent erhöhte Biegefestigkeit sowie ein

Elastizitätsmodul von 8,5 (F00) bzw. 8,4 GPa (F03).

Beide Viskositätsstufen sind in den Farben A0,5; A1; A2; A3; A3,5; A4, dem opakeren A20 sowie der Schmelzfarbe „Incisal“ (Inc) und einem „Bleaching White“ (BW) erhältlich. Zusätzlich gibt es in F00 die Opakfarben A0,50 und A10 und in F03 die opake A30, ein „Milky“ (MI) und „Cervical“ (CV).

Wie alle Beautifil Flows können auch die Flow-Plus-Komposits aus den Spritzen dank eines 360 Grad drehbaren „finger-grips“ und einer auswechselbaren, feinen Kanüle unkompliziert direkt appliziert werden.

Mit der Erweiterung um die Flow Plus-Produkte ist das Beautifil-Restorationssystem um ein bislang ein-

zigartiges Plus für den Anwender bereichert worden. Die Beautifil-typischen ästhetischen Qualitäten können mit angenehmsten Handling-Eigenschaften und praxisökonomischen Arbeitsstrategien kombiniert in allen Indikationsbereichen umgesetzt werden.

SHOFU DENTAL GMBH

Am Brüll 17
40878 Ratingen
Tel.: 02102 8664-0
E-Mail: info@shofu.de
www.shofu.de

P **IMPLANTLINK® SEMI FORTE MIT VERSTÄRKTER HAFTUNG**

KENNZIFFER 0892

implantlink® semi, der erste semipermanente Implantatzement auf Kunststoffbasis, dualhärtend, zum Zementieren von implantatgetragenen Restaurationen, jetzt in zwei Varianten: Classic + Forte.

Die Classic Variante, mit regulärer Haftung zur kraftschlüssigen Zementierung von Standardaufbauten, wurde bereits vom Dental Advisor mit viereinhalb Sternen ausgezeichnet. implantlink® semi Forte, mit verstärkter Haftung und Druckfestigkeit, speziell entwickelt für die langzeitprovisorische Befestigung auf individualisierten, in der Haftungsfläche reduzierten oder besonders kleinen Aufbauten.

implantlink® semi ermöglicht erstmals die sichere Fixierung der Suprakonstruktion



und gewährleistet gleichzeitig ein problemloses, zerstörungsfreies Entfernen, selbst nach längerer Tragezeit. Das Material lässt sich präzise direkt aus der minimix-Kartusche applizieren. Die hochvernetzte, nicht spröde Kunststoffstruktur garantiert höchste Randspaltdichte und verschleißt zuverlässig

den Spaltraum zwischen Abutment und Suprastruktur, die Frakturanfälligkeit wird reduziert. Schnelleres Einsetzen der plastischen Phase zur Überschussentfernung durch duales Härtesystem. Kein Anhaften am Weichgewebe, Rückstände lassen sich mühelos entfernen.

implantlink® semi ist eugenolfrei, antibakteriell, kompatibel mit allen Materialkombinationen und weist, durch seine extrem niedrige Filmdicke von nur 7 µm, einen deutlich geringeren Verdrängungswiderstand auf als herkömmliche Zemente. In natural-opaque für optimale Ästhetik bei gleichzeitig guter Sichtbarkeit beim Entfernen.

Jetzt in jeder Forte-Standardpackung: Gratis implantlink® Scaler, aus glasfaserverstärktem Spezialkunststoff (keine Kratzer auf Titan, Keramik) zur Entfernung von Zementüberschüssen nach der Eingliederung.

Video Clip und weitere Informationen unter www.detax.de/implantlink

DETAX GMBH & CO. KG

Carl-Zeiss-Straße 4
76275 Ettlingen
Tel.: 07243 510201
E-Mail: post@detax.de
www.detax.de

* Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.