


# Transferbogen ist unerlässlich

Auf das Anlegen eines Übertragungsbogens wie dem SAM Transferbogen AXIOQUICK® sollte heutzutage grundsätzlich nicht mehr verzichtet werden. Diese Maßnahme dauert nur wenige Minuten und ist nach der GOZ abrechenbar.

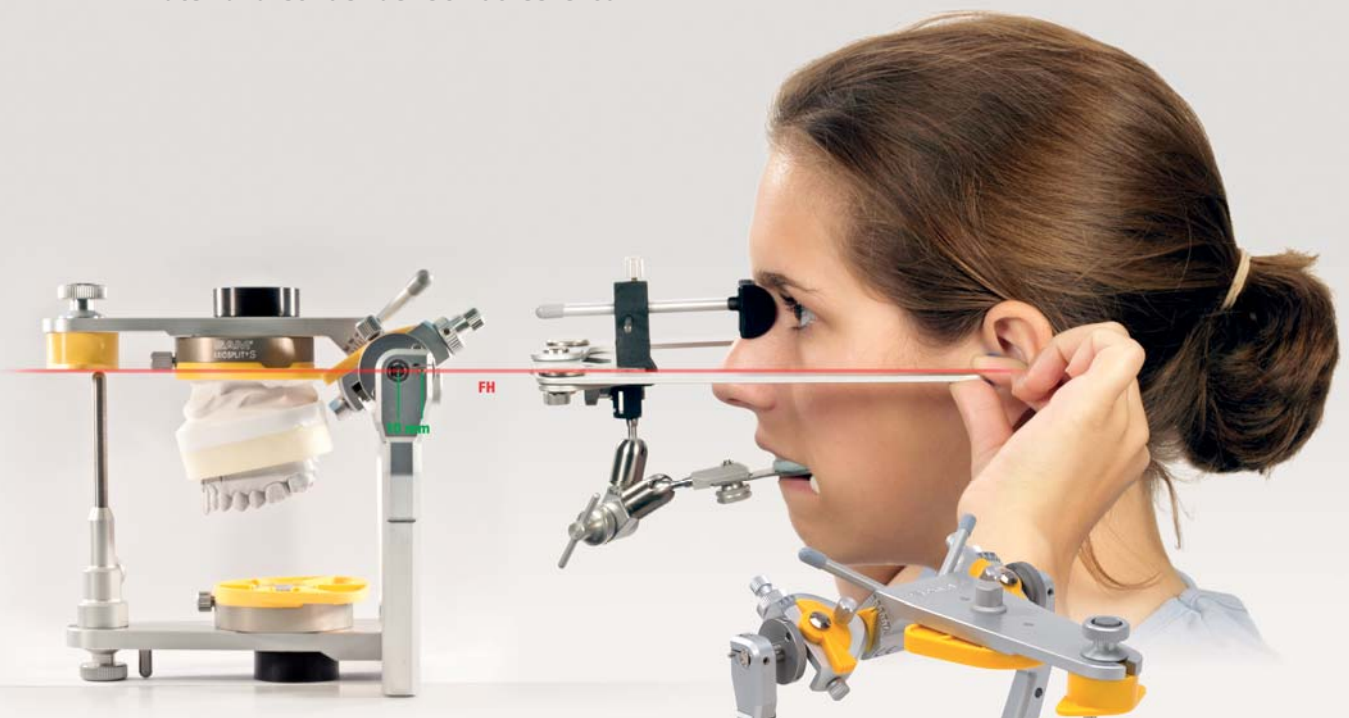

**F**ür den durchdachten AXIOQUICK® sprechen mehrere, zum Teil einzigartige Faktoren:

- Die Scherenmechanik ist wartungsfrei, leicht und dennoch stabil.
- Die Symmetrie gewährleistet eine reproduzierbar gute anatomische Positionierung.
- Die torsionsfreie Bissgabelverklebung (NT-Klemme + AX-Axiomatic) verhindert ein Verkippen der Bissgabel.
- Die neue weiche Nasionstütze ist für den Patienten sehr angenehm zu tragen und dadurch noch komfortabler geworden.
- Gesichts- und Artikulatormitte stimmen, durch eine spiegelbildliche Konstruktion, überein.
- Der AXIOQUICK®, in Verbindung mit der Nasionstütze AX, verwendet die Referenzpunkte Porion und Orbitale und etabliert damit die Frankfurter Horizontale.
- Hygieneschutzkappen sorgen für einen hohen Tragekomfort bei Erwachsenen.
- Das ästhetische Empfinden fordert, dass die Oberkieferzähne zum Schädel des Patienten in Relation stehen und so in den Artikulator übertragen werden können. Durch das Ausrichten an der Bipupillarlinie mittels Peilstab wird dies möglich.
- Die Unterkieferrotationsachse des Patienten wird exakt auf den Artikulator übertragbar.



## Fazit

Mit dem AXIOQUICK® und der entsprechenden Anlegetechnik wird das Verhältnis Maxilla zum Kranium genau in den Artikulator übertragen.

## kontakt.

**SAM® Präzisionstechnik GmbH**

Fußbergstr. 1  
82131 Gauting bei München  
Tel.: 089 800654-0  
www.sam-dental.de