

Duty Cycle: Akademischer Begriff oder von klinischer Relevanz?

Während der Begriff Duty Cycle das Verhältnis von Pulsdauer zu Pulsperiode beschreibt, ist er jenseits der physikalischen Terminologie auch ein Konzept, das bei der laserunterstützten dentalen Therapie immer mehr Einsatz findet. Im folgenden Artikel werden drei verschiedene Wellenlängen beschrieben, die mit drei klinischen Effekten und Duty Cycles korrespondieren.

Dr. Gottfried Gisler, M.Sc.

■ Der Duty Cycle ist das Verhältnis von Pulsdauer zu Pulsperiode (Abb. 1). Eine Pulsperiode ist zeitlich die Summe von Pulsdauer und Pulspause und wird im gepulsten System als 1/Frequenz definiert. Der Duty Cycle wird durch Pulsdauer und Frequenz beeinflusst, indem Verlängern/Verkürzen der Pulsdauer und Erhöhen/Vertiefen der Frequenz den Duty Cycle vergrößern/verkleinern. Eine Verkleinerung des Duty Cycle bedeutet relativ immer auch geringere thermische Nebeneffekte und vice versa. Dabei ist dem Laseranwender vermutlich kaum bewusst, dass der Duty Cycle bei Arbeiten im Dauerstrichbetrieb oder cw-Modus (Continuous-Wave-Modus) das Maximum von 1 oder 100% erreicht, die Pulsdauer also einer Pulsperiode entspricht.

derseits nimmt der Divergenzwinkel des Laserstrahls proportional mit Verkleinerung des Strahlradius zu. Daraus resultiert, dass die für eine Koagulation erwünschte nötige Hitze hohe Intensitäten im Kontaktmodus der Faser zum Gewebe voraussetzt. Damit das um ein blutendes Gefäß circumferente Gewebe thermisch nicht geschädigt wird, muss zeitlich mit kürzestmöglichen Lasingeinsätzen oder mit kleinstmöglichen Dosen (J/cm^2) gearbeitet werden. Der klinische Effekt muss bei diesen Wellenlängen im nahen Infrarotbereich im Weichgewebe sofort ersichtlich sein, um hohe Penetrationstiefen der Laserenergie aufgrund der optischen Eigenschaft des Gewebes zu vermeiden. An einem klinischen Beispiel sollen die physikalischen Vorlagen einfach erklärt werden:

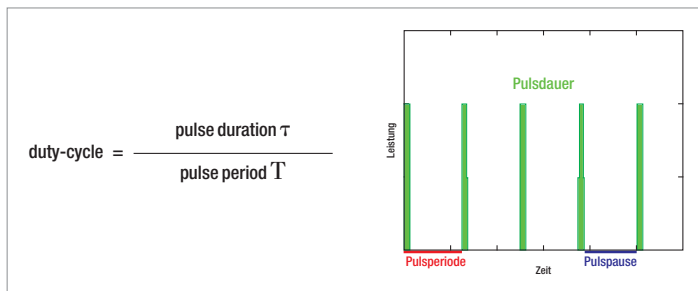


Abb. 1: Duty Cycle ist das Verhältnis von Pulsdauer zu Pulsperiode.

Duty Cycle 1: Diodenlaser 810 nm Klinischer Effekt: Koagulation ohne Weichgewebeabtrag

Ein maximaler Duty Cycle von 1 oder 100% entspricht im Laserbetrieb einem cw-Modus. Je kleiner der Faserdurchmesser am Austrittsende des Laserstrahls ist, desto höher wird die Leistungsdichte oder Intensität (W/cm^2). An-

Abdrucknahme nach Kronenpräparation

Normalerweise blutet das Zahnfleisch nach subgingivaler Kronenpräparation trotz Stopfen von Retraktionsfäden dort, wo es infolge mangelnder Mundhygiene im Interdentalbereich entzündet ist. Und andererseits kann es im oralen Bereich während der Präparation wegen schlechter Sicht leicht verletzt werden. Vor der Abdrucknahme muss dieses Zahnfleisch ohne weiteren Weichgewebeverlust zur Koagulation gebracht werden. Die Technik ist einfach und setzt folgende Lasersettings voraus:

- hohe Leistungsdichte (kleiner Faserdurchmesser von 200 bis max. 400 μm)
- Duty Cycle 1 (cw-Modus)
- Arbeiten im Kontaktmodus der Faser zum Weichgewebe
- zeitlich kurzer Lasingeinsatz von 1 bis max. 3 Sekunden (kleine Dosis)
- tiefe Leistung von 1 bis max. 2 W

Koagulationstechnik

Da das Blut auch nur an wenigen Stellen verletzten Zahnfleisches sofort den ganzen Zahnfleischsulkus füllt



Abb. 2: Zustand nach a) subgingivaler Kronenpräparation, b) nach Koagulation und c) direkt nach blutungsfreier Abdrucknahme.

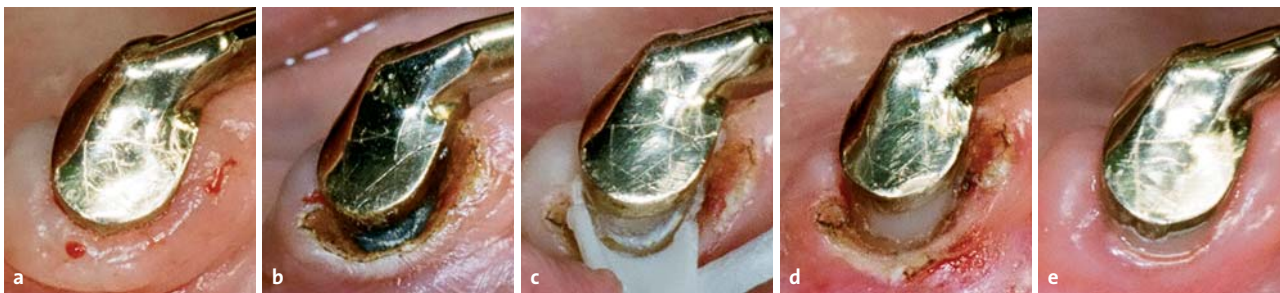


Abb. 3: Sanierung einer **a)** subgingivalen Karies mittels **b)** blutungsfreier GE, **c)** Er:YAG-Konditionierung des Dentins und **d)** adhäsiv gelegter Kompositfüllung sowie **e)** drei Wochen danach.

(Abb. 2a), sollte die Dentalassistentin den Sulcus gingivae mit der Dreiwegspritze ausspülen (nicht aussprayen!), um die Blutungspunkte auffindig zu machen. Dann wird der Zahnarzt diesen Blutpunkt nach obigem Setting zur Koagulation bringen.

Gelingt eine Koagulation eines blutenden Gefäßes, entsteht sofort ein kleiner schwarzer Koagulationspunkt (Abb. 2b). Nach Koagulation werden die Retraktionsfäden gelegt und Abdruck genommen (Abb. 2c). Gelingt beim ersten Anlauf die Koagulation nicht, kann entweder eine Faser mit kleinerem Durchmesser eingesetzt werden, um die Leistungsdichte (Intensität) zu erhöhen, oder bei gleichem Faserdurchmesser die Leistung bis zu einem maximalen Wert von 2 Watt erhöht oder der Lasingeinsatz bis maximal 3 Sek. verlängert werden, aber immer unter vollem Kontakt der Faser zum blutenden Gefäß. Falls aber Lasingezeit und Leistung gleichzeitig erhöht werden, ohne den klinischen Effekt der Koagulation erreicht zu haben, können aufgrund zu hoher Energiemengen ($E = \text{Leistung} \times \text{Zeit}$) thermische Schäden im umliegenden Gewebe des blutenden Gefäßes entstehen. Und da solche Arbeiten unter Anästhesie durchgeführt werden, fehlt das so wichtige schmerzreflektorische Feedback des Patienten. Die Energie wird nämlich immer absorbiert, wenn auch vielleicht nicht dort, wo sie erwünscht wäre: im blutenden Gefäß.

**Duty Cycle im einstelligen Prozentbereich:
CO₂-Laser 10.600 nm
Klinischer Effekt: Koagulation mit
Weichgewebeabtrag**

Der CO₂-Laser 10.600 nm ist die ideale Wellenlänge, Weichgewebe blutungsarm oder blutungsfrei zu modellieren oder abzutragen. Dank einem hohen Absorptionskoeffizienten im Wasser von $10^3/\text{cm}$ ist die Penetra-

tionstiefe der Laserenergie gering und der Lasereffekt ist immer sofort ersichtlich. Mit Pulsdauern im Mikrosekundenbereich kann mit hohen Frequenzen effizient und mit kleinen Duty Cycles im einstelligen Prozentbereich schmerzarm gearbeitet werden. Gingivektomien oder Entfernung von Gingivahyperplasien im Bereich der Attached gingiva können deshalb meist ohne Anästhesien durchgeführt werden.

Vorsicht mit dem CO₂-Laser 10.600 nm ist aufgrund der hohen Absorptionskonstanten von $10^4/\text{cm}$ im Hydroxylapatit und dessen Ablationsmechanismus (explosive Verdampfung) immer bei Entfernung von Weichgewebe in den Randzonen zum Knochen (Periimplantitis, Ligamententfernungen etc.) oder am vitalen Zahn geboten.

Klinische Beispiele

Abbildung 3 zeigt einen strategisch wichtigen Pfeilerzahn (UK-Stegprothetik) mit subgingivaler Karies. Eine Gingivektomie (GE) ist zur Sanierung Voraussetzung. Das Zahnfleisch wird mit dem CO₂-Laser mit einer Pulsdauer von 350 µs und einer Frequenz von 140 Hz effizient blutungsfrei entfernt. Ein Duty Cycle von knapp 5 % erlaubt bei zeitlich maximal dauernden Lasingeinsätzen von 3 Sek. oft anästhesiefreies Arbeiten. In Abbildung 3 ist auch der Nachteil des CO₂-Lasers ersichtlich. Die im Hydroxylapatit absorbierte Laserenergie wird explosiv verdampft. Eine oberflächliche Karbonisation des Dentins ist die Folge (Abb. 3b). Die dabei entstehende Hitze hat beim devitalen Zahn kaum Konsequenzen. Mit dem Er:YAG-Laser kann das karbonisierte Dentin entfernt und ein mikroretentives Haftmuster für die Kompositfüllung generiert werden (Abb. 3c). Die Kompositfüllung wird dank blutungsfreier GE und mithilfe eines Gingivaretraktors trocken adhäsiv (SE Adhäsiv) gelegt (Abb. 3d). Drei Wochen später ist die Gingiva partiell entzündungsfrei regeneriert (Abb. 3e).



Abb. 4: Zahnloser Oberkiefer mit **a)** großem Prothesenlappenfibrom, **b)** nach Operation und **c)** nach Abheilung.

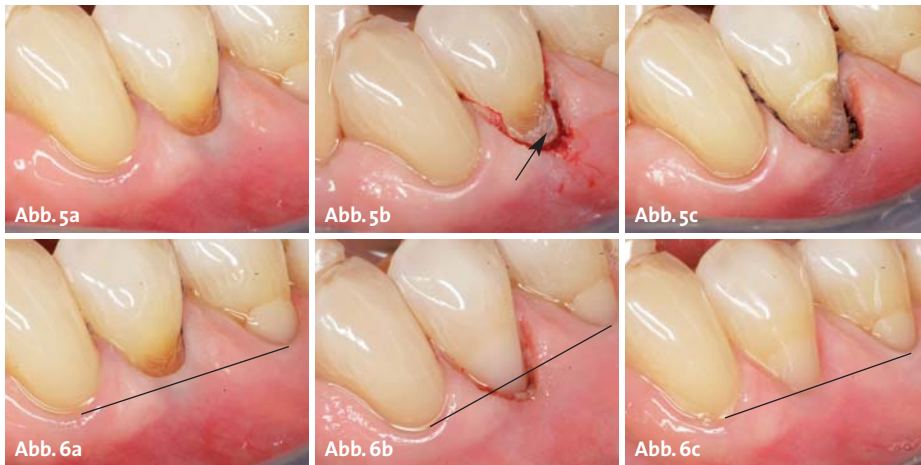


Abb. 5: a) Subgingivaler Zahnalsdefekt 34, b) nach GE mit Duty Cycle 1‰ (10 Hz, 100 µs) und fluence 10 J/cm² (80 mJ, 1.000 µm spotsize) mit zufällig während der GE gebildetem mikroretentivem Haftmuster (Pfeil) und c) Blutstillen mit in Aluminiumchlorid getränktem Retraktionsfaden. – **Abb. 6:** Regenerationsfähigkeit der Gingiva nach GE mit Duty Cycle 1‰ und fluence 10 J/cm²: a) vor GE, b) nach Politur der Kompositfüllung und c) einen Monat später.

Wird bei größeren Eingriffen unter Anästhesie mit dem CO₂-Laser eine stärkere Blutung erwartet, so kann mit einem höheren Duty Cycle die thermische Nebenwirkung bewusst verstärkt werden, indem sowohl die Frequenz erhöht als auch die Pulsdauer verlängert wird. Die Entfernung des Prothesenlappenfibroms (Abb. 4a) und totale Vestibulumplastik mit sekundärer Epithelisation bei diesem zahnlosen Oberkiefer wurde mit dem CO₂-Laser mit einer Frequenz von 180 Hz und einer Pulsdauer von 500 µs, somit einem Duty Cycle von 8 %, durchgeführt (Abb. 4b). Es ist bei der Präparation des Periosteum aber sehr darauf zu achten, dass der Laserstrahl, um Karbonisationen im Knochen zu vermeiden, parallel dazu geführt wird. Das Resultat zehn Monate danach zeigt gute Schleimhautverhältnisse (Abb. 4c). Da direkt nach der Operation die eigene Prothese bis zur prospektiven Umschlagsfalte konditioniert wurde, hatte die Patientin sozusagen keine postoperativen Schmerzen.

**Duty Cycle im einstelligen Promillebereich:
Er:YAG-Laser 2.940 nm
Klinischer Effekt: Weichgewebeabtrag
ohne Koagulation**

Je kleiner der Duty Cycle wird, desto geringer werden die thermischen Nebeneffekte. Das hat große Bedeutung, wenn im Bereich von wärmesensiblen Geweben wie vitalem Zahn oder Knochen gearbeitet wird. Große und tief subgingival gelegene Zahnalsdefekte erfordern zur Rekonstruktion mit einer adhäsiv gelegten Kompositfüllung eine GE (Abb. 5a). Um thermische Nebeneffekte am Zahn zu vermeiden, kann die GE mit einem Er:YAG- oder Er,Cr:YSGG-Laser mit einem sehr kleinen Duty Cycle im Promillebereich durchgeführt werden. Wasser ist bei Arbeiten mit diesen Wellenlängen im mittleren Infrarotbereich in der Nähe von Zahn oder Knochen eine *conditio sine qua non* und hat bei der Entfernung von Gingiva einen kühlenden Effekt. Die Gingiva kann im Kontaktmodus dank Wasserkühlung und Duty Cycle im Promillebereich

(Frequenz 10 Hz, Pulsdauer 100 µs) trotz sehr hoher Absorptionskonstanten im Wasser von 10⁴/cm anästhesiefrei und im „Kaltabtrag“ entfernt werden. Nachteil von so tiefen Duty Cycles ist wegen geringen thermischen Nebeneffekten ein leicht blutendes Zahnfleisch (Abb. 5b). Mit einem in Aluminiumchlorid getränktem Retraktionsfaden können diese Blutungen im Normalfall problemlos gestoppt werden (Abb. 5c). Bei hartnäckigen Blutungen kommt der Diodenlaser mit Duty Cycle 1 wie unter Punkt 1 beschrieben zum Einsatz. Vorteil hingegen ist, dass zufällige und oft unvermeidbare Laserpulse ins vitale Dentin während der GE ein mikroretentives Haftmuster (Abb. 5b, Pfeil) für die Kompositfüllung gene-

rieren. Optimale Haftmuster im sklerosierten Dentin entstehen, wenn die fluence 10 J/cm² nicht übersteigt. Eine GE dieser Art lässt sich sehr einfach mit 70–80 mJ und einem spotsize von 1.000 µm (9–10 J/cm²) im Kontaktmodus zum Weichgewebe ausführen. Die Kompositfüllung kann nach Konditionieren von Schmelz und Dentin mit dem Er:YAG-Laser (Abb. 5c) bei fluences knapp oberhalb der Ablationsschwelle mit kleinstmöglichem Substanzabtrag minimalinvasiv adhäsiv gelegt werden (Abb. 6b). Ein Vergleich des Gingivaverlaufes vor GE (Abb. 6a), direkt nach Politur der Kompositfüllung (Abb. 6b) und einen Monat später (Abb. 6c) zeigt, dass die Regenerationsfähigkeit des Weichgewebes nach „Kaltabtrag“ gut ist.

Zusammenfassung

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die thermischen Nebeneffekten bei einem Lasereinsatz durch viele Faktoren wie Energiedosis, fluence, Absorptionskonstante, Intensität, Absorptionsart, optische Eigenschaft des Gewebes, Kontakt-/Nonkontakt-Modus oder eben auch vom Duty Cycle beeinflusst werden. Der Duty Cycle ist ein Element im Zusammenspiel der Wechselwirkungen von Materie und Licht und erlaubt, thermische Nebeneffekten ganz bewusst punktförmig zu erzeugen oder zu minimieren. Der Laseranwender kann die Parameter der Lasergeräte einsetzen, um einen bestimmten klinischen Effekt zum Wohle des Patienten zu erzielen. ■

■ KONTAKT

Dr. med. dent. Gottfried Gisler, M.Sc.
Bahnhofstr. 14, 8708 Männedorf, Schweiz
info@zahnarzt-gisler.ch
www.zahnarzt-gisler.ch



**SAVE
THE DATE**

15.–16. NOVEMBER 2013
IN BERLIN
MARITIM HOTEL

LASER START UP 2013



22.

JAHRESTAGUNG DER DGL e.V.

SCAN MICH



Bilder
21. Jahrestagung
DGL // LASER
START UP 2012

QR-Code einfach
mit dem Smartphone
scannen (z. B. mithilfe
des Readers Quick Scan)

PROGRAMM ANFORDERN!

FAXANTWORT
0341 48474-390

Bitte senden Sie mir das Programm zum/zur

LASER START UP 2013 22. JAHRESTAGUNG DER DGL

am 15.–16. November 2013 in Berlin zu.

NAME/E-MAIL

Praxisstempel

LI 1/13



Call for papers

DGL | Deutsche Gesellschaft für Laserzahnheilkunde 22. Internationaler Jahreskongress

15.–16. November 2013 in Berlin, Hotel Maritim

Titel _____

Autor(en) _____

Name, Vorname, Titel _____

Institut(e) _____

Anschrift _____

Telefon/Fax/E-Mail _____ / _____ / _____

Abstract (max. 250 Wörter in Times New Roman, Schriftgröße 11)

Sitzung:

- (1) Wissenschaftliche Sitzung
- (2) Klinische Fallpräsentation

Art der Präsentation:

- (1) Vortrag
- (2) Poster Präsentation

Klassifikation:

- (1) Wiss. Grundlagen
- (2) Kavitätenpräparation
- (3) Kariesentfernung
- (4) Klinische Anwendung
- (5) Klinische Studien
- (6) Diagnostik
- (7) Endodontie
- (8) Parodontologie
- (9) Kariesprävention
- (10) Lasersicherheit
- (11) Chirurgie, Weichgewebe
- (12) Sonstige _____

Titel:

Der Titel muss kurz und deutlich den Inhalt der Arbeit wiedergeben.

Autoren:

Die Nachnamen bitte in Großbuchstaben schreiben.
Markieren Sie den Namen des Vortragenden mit einem Sternchen.

Inhalt:

Ziel der Arbeit, Material und Methode, Ergebnisse, Diskussion
Bitte fügen Sie eine Kopie auf CD bei!

Präsentationstechnik:

Computerprojektor (PowerPoint)

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

Prof. Dr. Norbert Gutknecht, Universitätsklinikum Aachen, Klinik für ZPP/DGL, Pauwelsstraße 30, 52074 Aachen
Tel.: 0241 8088164, Fax: 0241 803388164, E-Mail: sekretariat@dgl-online.de

Bitte bis spätestens 15. August 2013