EN PRODUKTE

IDS übertraf alle Erwartungen

FORESTADENT auf weltgrößter Dentalschau mit interessanten Neuheiten am Start. Ein stets gut besuchter Messestand sowie unzählige Besuchernachfragen lassen das Pforzheimer Unternehmen eine erfolgreiche IDS-Bilanz ziehen.



Beeindruckt zeigten sich die zahlreichen Besucher des FORESTADENT-Messestandes von den Produktneuheiten des Pforzheimer Dentalunternehmens.

sofort gewährleisten QuicKlear®-Brackets von FORESTADENT eine absolut unsichtbare und noch ästhetischere Korrektur von Zahnfehlstellungen. Denn statt bisher von 3 bis 3 sind diese jetzt von 5 bis 5 im Oberkiefer erhältlich. Somit sorgt die Keramikvariante des selbstligierenden Quick 2.0®-Systems mehr denn je für die perfekte Tarnung im Mund. Zu den zahlreichen Vorteilen des transluzenten Systems zählt die einfache splitterfreie Abnahme der Brackets. Dies wurde begeistert von zahlreichen Besuchern der diesjährigen Internationalen Dental-Schau ausprobiert und bestätigt.

Zudem präsentierte das Pforzheimer Traditionsunternehmen den Messegästen eine weitere Neuheit: Ein spezielles Instrument – das Quick-Bogeninstrument – ergänzt nun das Quick®- und QuicKlear®-System und rundet dieses optimal ab. Das Ouick-Bogeninstrument er-



Perfekt getarnt und nahezu unsichtbar – die QuicKlear®-Brackets von FORESTADENT. Ab sofort sind diese von 5 his 5 im Oberkiefer erhältlich



Mithilfe des neuen Quick®-Bogeninstruments lassen sich Bögen noch einfacher und schneller in den Bracketslet einlegen

möglicht dem Anwender, Bögen künftig noch sicherer bei schwierigen Situationen, wie z.B. stark verlagerten Eckzähnen oder stark rotierten Zähnen, in den Bracketslot einzulegen.

Doch nicht nur die brandneuen Innovationen stießen am FORESTADENT-Stand auf großes Interesse. So sorgte u.a. das extrem flache 2D®-Lingualbracketsystem für rege Nachfragen. Auch der Functional Mandibular Advancer (FMA) zur compliance-unabhängigen Korrektur von Klasse II-Anomalien war Mittelpunkt zahlreicher Standgespräche.

Dass sich die jüngst um eine Lingualvariante ergänzten Bio-Bögen (BioStarter®, BioTorque®, BioLingual®) uneingeschränkter Beliebtheit erfreuen, machte auch diese weltgrößte Dentalschau mehr als deutlich. In Kombination mit den friktionsarmen Bracketsystemen von FORESTADENT gewährleisten jene thermoelastischen Bögen den Einsatz geringer Kräfte und sorgen somit für beste Behandlungsergebnisse. 🖾

KN Adresse

FORESTADENT
Bernhard Förster GmbH
Westliche Karl-Friedrich-Straße 151
75172 Pforzheim
Tel.: 0 72 31/4 59-0
Fax: 0 72 31/4 59-1 02
E-Mail: info@forestadent.com
www.forestadent.com

Alle Materialien fest im Griff

Weiteres Tool für Effizienz im Praxisalltag – Mit den neuen Kunststoffschalen "Signature Series Tubs" präsentiert Hu-Friedy eine zeitsparende Möglichkeit zur Organisation und zum sicheren Transport von Verbrauchsmaterialien.



Alles fest im Blick: In diesen Kunststoffschalen können Verbrauchs materialien gut geschützt geordnet und transportiert werden.

Ordnung ist das halbe Leben. Das gilt auch für den zahnmedizinischen Alltag. Hu-Friedy, weltweit führender Hersteller dentaler Präzisionshandinstrumente, präsentiert mit den neuen Kunststoffschalen "Signature Series Tubs" ein weiteres praktisches Tool zur effizienten Organisation der Arbeitsabläufe in (Fach-)Zahn-

arztpraxen und -kliniken. In den leicht zu handhabenden Schalen können alle für die Behandlung nötigen Verbrauchsmaterialien übersichtlich untergebracht und transportiert werden. Ein standardisier-Farbsystem erlaubt den schnellen Überblick über den Inhalt der Schalen. Für die tägliche Arbeit bedeutet das: Langes Suchen entfällt,

stattdessen wird viel Zeit eingespart.

Von besonderem Vorteil ist der Microban-Produktschutz: Die "Signature Series Tubs" verfügen über antimikrobielle Eigenschaften und bieten somit wirkungsvollen Schutz für die in den Schalen organisierten Materialien. Microban verhindert die Aktivität, das Wachstum sowie

die Vermehrung Mikroorganismen, welche die Materialien verfärben oder gar zerstören. Auch unangenehme Gerüche werden vermieden. Zudem schützt die feste Verriegelung des Deckels vor durch die Luft übertragbaren Verschmutzungen. In Kombination mit den Instrumenten-Management-Kassetten von Hu-Friedy bilden die Kunststoffschalen ein überaus effizientes Managementsystem, das sowohl die Effizienz als auch den Arbeitskomfort im Praxisalltag erheblich steigert. 🖎

KN Adresse


Hu-Friedy Mfg. Co., Inc. Zweigniederlassung Deutschland Rudolf-Diesel-Straße 8 69181 Leimen Tel.: 0 62 24/97 00-70 Fax: 0 62 24/97 00-97 E-Mail: info@hufriedy.eu www.hufriedy.eu

Leistungsstark wie eine Plasmalampe

Das zantomed Dentlight setzt einen neuen Standard im Bereich der LED-Lampen. Seine patentierte Lichtstreuungstechnologie erreicht eine Intensität von 1.500 mW/cm².

Das Dentlight misst sich an modernsten Plasmalampen und muss einen direkten Vergleich nicht scheuen. Seine Leistung ermöglicht eine enorm schnelle Polymerisation der Testkomposite in nur drei Sekunden. Das wertige Gerät im Aluminiumgehäuse ist dank modernster Akkutechnologie mobil und mit nur 113 g äußerst flexibel in der Handhabung.

Die Polymerisationslampe deckt ein Lichtspektrum von 390 bis 490 nm ab und

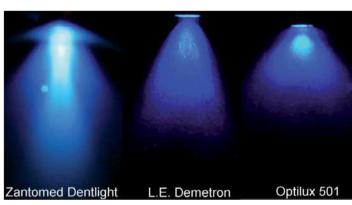

Trotz einiger Entfernung zur Lichtquelle erreicht das Dentlight die angegebene Intensität.

S NOISRE CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE PART

Das zantomed Dentlight verfügt über Eigenschaften wie eine Plasmalampe – mit Ausnahme des Preises.

eignet sich somit für alle am Markt befindlichen Komposite und Befestigungskunststoffe. Der Lampenkopf lässt sich in einem Bereich

von 360 Grad drehen und erreicht auch in einiger Distanz von der Lichtquelle noch die angegebene Intensität. Zur Anpassung des Aushärteradius sind Lichthärtekappen in den Größen 9 und 13 mm erhältlich. Bereits im Set inklusive ist der "Veneer-Antacker-Modus" mit einem Aufsatz von 3mm Durchmesser. Dieser ermöglicht es, Veneers fest anzubringen, ohne jedoch sämtliche Überschüsse bereits aushärten zu lassen. Mit dem eingebauten Lithium-Ionen-Akku lassen sich 540 x 5-Sekunden-Einheiten aushärten. Sollte dennoch die Energie ausgegangen sein, lässt sich das Ladekabel auch direkt an die Lampe anschließen, um unmittelbar mit der Arbeit fortfahren zu können. In 90 Minuten ist der Akku dann erneut geladen. Das eingebaute LCD-Display offeriert die Aushärtemodi 5, 10 oder 20 Sekunden und lässt

sich programmieren, um wiederkehrende Sequenzen ohne Drücken der Tasten umzusetzen.

Unter der Maxime "zusätzliche Wertschöpfung für die Praxis" bietet zantomed ausgewählte Produkte im Direktvertrieb an. Das Handelsunternehmen ist nach eigener Aussage so in der Lage, gehobene Qualität zu moderaten Preisen anzubieten. Für jede erste Onlinebestellung werden bis Ende April 50,00 € gutgeschrieben. Weitere Informationen unter angegebener Adresse. ⊠

KN Adresse

zantomed Handels GmbH Ackerstr. 5 47269 Duisburg Tel.: 02 03/8 05 10-45 Fax: 02 03/8 05 10-44 E-Mail: info@zantomed.de www.zantomed.de www.white-veneers.de

Kombination für gründliche Pflege

 $Ka Vo\,CLEAN spray\,und\,Ka Vo\,DRY spray\,gewährleisten\,eine\,validierte\,Intensiv-Innenreinigung\,von\,Instrumenten\,und\,Turbinen\,gem\"{a}B\,RKI-Empfehlungen.$

ge erfüllen die Anforderun-

Das bewährte KaVo-Pflegesystem sichert seit vielen Jahren die vorbildliche Reinigung und Pflege und damit die Werterhaltung von KaVo-Hand- und Winkelstücken



und Turbinen. Das KaVospray für die manuelle Pflege und das KaVo QUATTROcare für die voll programmgesteuerte maschinelle Pfle-

gen an eine gründliche, zuverlässige und wirtschaftliche Wiederaufbereitung. Basierend auf den RKI-Empfehlungen zur Wiederaufbereitung ist bei Praxisbegehungen ein Validierungsnachweis für die einzelnen Wiederaufbereitungsschritte zu erbringen. Mit dem neuen KaVo CLEANspray und dem KaVo DRYspray für die manuelle Intensiv-Innenreinigung von Instrumenten und Turbinen bietet KaVo ab sofort zwei neue Produkte an, die diese Forderung auf schnelle und wirtschaftliche Weise mit entsprechendem Validierungsgutachten gerecht werden. Das manuelle Durchsprühen der Instrumente und Turbinen mit KaVo CLEANspray erzielt eine validierte Intensivreinigung der Getriebekanäle inklusive Sprayleitungen, bei der auch Blutrückstände konsequent entfernt werden. Durch das anschließende Durchsprühen mit KaVo DRYspray werden die Instrumente und Turbinen rückstandsfrei getrocknet. Damit sind die Voraussetzungen für die Effektivität der weiteren Hygiene-Aufbereitung gemäß RKI-Empfehlungen geschaffen.

Die Kombination aus KaVo CLEANspray und KaVo DRYspray stellt eine wirtschaftliche Ergänzung des KaVo Pflegesystems dar und gewährleistet die nach RKI geforderte validierte Intensiv-Innenreinigung von Instrumenten und Turbinen.

KN Adresse

KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 88400 Biberach/Riss Tel.: 0 73 51/56-15 99 Fax: 0 73 51/56-16 59 E-Mail: info@kavo.com www.kavo.com

easy KFO – Die neue Leichtigkeit der Behandlung

Auf der IDS 2009 präsentierte die Dentalmanufaktur ULTRADENT eine spezielle Einheit für die Kieferorthopädie, die auf Basis der erfolgreichen easy-Behandlungseinheiten entwickelt wurde. Mit dem neuen, speziell für die junge Zielgruppe entwickelten Konzept setzen die Münchener Dental-Spezialisten auf modernste Werkstoffe, frisches Design und praxisgerechte Ergonomie.



Das Ergebnis ist eine durchdachte Formensprache, die ganz gezielt bei der Ergonomie ansetzt und von da aus einen Arbeitsplatz gestaltet, der alle Anforderungen der modernen Kieferorthopädie berücksichtigt.

Durch einen neuen, ökologischen und ökonomischen Material-Mix, z.B. ein neuartiger Kunststoff mit schlagzäher und hochverdichteter Oberfläche, konnte bei der Entwicklung von easy dem Design ein großer Spielraum eingeräumt werden. Besonders auffällig ist die Leichtigkeit, die die gesamte Behandlungseinheit

ausstrahlt. Auch den Punkten Hygiene, Servicefreundlichkeit und Langlebigkeit wurde hohe Aufmerksamkeit gewidmet. Der Name ist Programm und macht auf die klare Linienführung und das großzügige Raumangebot sowie die einfache Bedienung und das funktionelle Design aufmerksam. Die neue Konstruktion des Patientenstuhls ermöglicht einen sehr nahen und direkten Zugang zum Patienten, was besonders von Kieferorthopädinnen und Kieferorthopäden gewünscht wird. Die ULTRADENT-Modulbauweise erlaubt für alle easy-Behandlungseinheiten eine

Ausstattung mit hochwertigen

dern, kann mit diesen Bögen aus dem Hause smile dental Instrumenten und kann dadurch nahezu alle Wünsche



der Behandler erfüllen. Das linksmontierte easy-Bedien-

element ist eine Neuentwicklung, die in Sachen Positionierung und Bedienung alle Wünsche erfüllt, bis zu sechs Köcher können individuell bestückt werden. Auch kollektorlose Mikromotoren kön-

nen eingesetzt werden. EineTrayablage am bodenmontierten Schwebearm bietet höchste Stabilität und Platz für zwei Normtrays. Viele Details, wie das Echtglas-Display, ein optionaler Funk-Fußanlasser und der einfache Zugang zum tropffreien Filtersystem erleichtern die Behandlung, die Wartung, den Service und unterstützen die Praxishygiene. Auch das sichere Handling des Filtersystems wurde für easy neu konzipiert, eine Rücksaugfunktion entleert das

nischen Gesamtkonstruktion

Filtergehäuse vor dem Öffnen und ermöglicht so eine saubere und schnelle Filterreinigung. Polster in vielen Farben, ein individuelles Kopfstützensystem mit zwei Kopfstützen und drei Auflagen sorgen für angenehme Wohlfühlatmosphäre in der Praxis. Eine fest mit der Speifontäne verbundene Armauflage bietet serienmäßig zusätzlichen Komfort. Die Speifontäne ist fest mit dem Stuhl verbunden, der Patient findet bequemdenWegzuWasserglas und Speibecken. Die neue easy-Klasse schafft mit der harmo-

eine Faszination und eine Vielzahlvon Anwendungsmöglichkeiten. Weitere Informationen unter angegebener Adresse. 🖾

KN Adresse

ULTRADENT Dental-Medizinische Geräte GmbH & Co. KG Stahlgruberring 26 81829 München Tel.: 089/420992-70 Fax: 089/420992-50 E-Mail: info@ultradent.de www.ultradent.de

Zahnfarben und ästhetisch

Lediglich in der Front beschichtet, gewährleisten die Cosmetic-NiTi- und -Stahlbögen des Düsseldorfer Unternehmens smile dental eine optisch perfekte Ästhetik, ohne dabei die Friktion zu beeinflussen.



der kosmetische Wunsch des Patienten optimal erfüllt werden. Die Cosmetic-Bögen sind in folgenden Abmessungen beziehbar: .0120 bis .0200 und $.0160 \times .0160$ smile Cosmetic-Nickel-Tita-KN Adresse nium und -Stahlbögen erhal-

schichtung nur noch in der sichtbaren Front des Drahtes. Somit wird die Bogen-Bracket-Friktion nicht mehr beeinflusst.

Ohne die gewohnte Mechanik während der kieferorthopädischen Behandlung zu verän-

Handelsgesellschaft mbH Neanderstr. 18 40233 Düsseldorf Tel.: 02 11/2 38 09-0 Fax: 02 11/2 38 09-15 E-Mail: info@smile-dental.de

ten ihre zahnfarbene Besmile dental

www.smile-dental.de

Neue Lingualbögen vorgestellt

Highland Metals Inc. präsentiert neue Bögen für die Lingualtechnik in Stahl, superelastischem NiTi, Hitze aktiviertem NiTi und BetaBlue™.

Highland Metals Inc. präsentiert neue Lingualbögen, welche volle Flexibilität während der Behandlung garantieren.



Die Lingualbögen sind in vier verschiedenen Drahtarten erhältlich (Stahl, superelastischem NiTi. Hitze aktiviertem NiTi und BetaBlue™) und somit ideal für Patienten geeignet, die ihr Lächeln ohne auffällige Spangen verschönern wollen.

Highland Metals' Lingualbögen kombinieren Ästhetik und Komfort herausnehmbarer Spangen mit der maximalen Kontrolle einer festen Apparatur für schnellere und effizientere Zahnbewegungen. Die Lingualbögen werden direkt am Patienten angepasst und garantieren

dadurch einen exzellenten Tragekomfort.

Die Lingualbögen aus Stahl werden in einer universellen Bogenform angeboten, welche dem Behandler die Freiheit gibt, eigene Offsets in die Bögen einzuarbeiten. Ober- und Unterkiefer-NiTi-Bögen sind bereits mit Offsets erhältlich. Die neuen Bögen werden in verschiedenen Größen zu je zehn Drähten pro Packung angeboten. Wie bei allen Produkten von Highland Metals können Sie sich auch hier auf ausgezeichnete Qualität zu besten Preisen verlassen. Kostenlose Muster können unter angegebener Adresse angefordert werden.

KN Adresse


Highland Metals Inc.

419 Perrymont Ave. San Jose, CA 95125 Tel.: 1-800-368-6484 (USA/Kanada) Fax: 0800-819-7050 E-Mail: orders@highlandmetals.com www.highlandmetals.com

Erfolg im Dialog





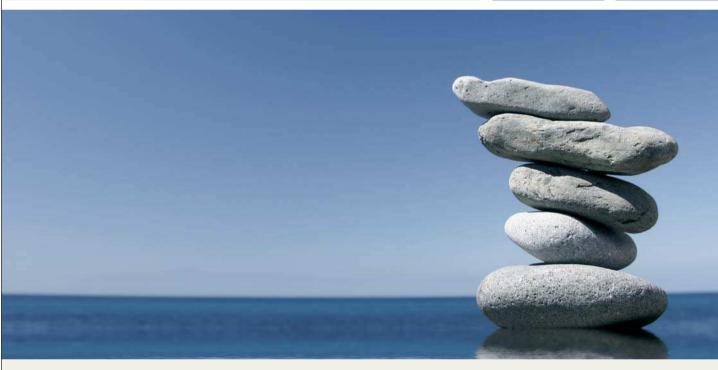

Das unverwechselbare Dentaldepot!

Alles unter einem Dach:

dental bauer-gruppe – Ein Logo für viel Individualität und volle Leistung

Die Unternehmen der dental bauer-gruppe überzeugen in Kliniken, zahnärztlichen Praxen und Laboratorien durch erstklassige Dienstleistungen.

Ein einziges Logo steht als Symbol für individuelle Vor-Ort-Betreuung, Leistung, höchste Qualität und Service.

Sie lesen einen Namen und wissen überall in Deutschland und Österreich, was Sie erwarten dürfen.

- Kundennähe hat oberste Priorität
- Kompetenz und Service als Basis für gute Partnerschaft
- Unser Weg führt in die Zukunft



www. dentalbauer.de

Eine starke Gruppe