

# products

DMG

## Ästhetische Veneerbefestigung leicht gemacht



Infos zum Unternehmen



Hochwertige Veneerversorgungen sind stetig im Aufwind. Mit Know-how und den richtigen Materialien kann der Zahnarzt sich hier in einem äußerst interessanten Bereich etablieren. Mit dem neuen Vitique Veneer-System bietet DMG einen adäquaten Partner für die Befestigung. Das Vitique-System wurde speziell für Veneerarbeiten entwickelt und umfasst zwei Kits im gemeinsamen Schubert: das Cementation Kit mit Zementen und Try-in-Pasten und das Accessory Kit mit Ätzelgel, Silan und Bond. Für jede Farbe enthält das Vitique Cementation Kit eine entsprechende Try-in-Paste. In die Abstimmung von Try-in und Zement ist viel Arbeit investiert worden. Das Er-

gebnis: Die präzise Farbübereinstimmung erlaubt eine verlässliche Vorschau auf das Endergebnis. Um die Eingliederung von Veneers zu erleichtern, wurde ein spezieller Veneer-Tip entwickelt. Mit ihm kann das Material in einem flachen Streifen gleichmäßig aufgetragen werden. Die patentierte Monomerformel sorgt für eine anwendungsoptimierte Materialkonsistenz und ermöglicht einfachste Überschussentfernung. Über das reine Produkt hinaus unterstützt Vitique den Zahnarzt mit weiteren Services und Hilfestellungen. Dazu gehören der bebilderte Step-by-Step User Guide und das VeneerVideo Tutorial mit Praxistipps und wissenschaftlichen Hintergründen. Außerdem wurde eine Experten-Hotline eingerichtet, unter der renommierte Experten für Veneerfragen zur Verfügung stehen.\*

*\*Bitte beachten Sie, dass die Hotline-Experten keine Diagnose- und Therapieberatung vornehmen, sondern die Beratung sich allein auf eine Hilfestellung für eine optimale ästhetische Anwendung im Rahmen der Veneerversorgung bezieht.*

**DMG**

Kostenfreies Service-Telefon:  
0800 3644262  
[www.dmg-dental.com](http://www.dmg-dental.com)

Infos zum Unternehmen



LOSER

## Sicherheit für die Mehrfunktionsspritze

Mit Pro Sleeve ist nun ein kompletter hygienischer Schutz für die Mehrfunktionsspitze verfügbar. Die transparenten Einweghüllen ermöglichen neben den Pro-Tip Einwegansätzen eine sichere und hygienische Ausstattung der Spritzen und bieten einen zuverlässigen Schutz für Behandler und Patient. Die Einweghüllen passen auf alle Funktionsspritzen und werden zusätzlich zu den Pro-Tip Turbo Einwegansätzen an der Arzt- und Helferinnenseite angebracht. Sie können einfach über die Spritze gezogen werden und decken den Handgriff während der Behandlung zuverlässig ab. Die als semikritisch B eingestufte Multifunktionsspritze ist eines der am meisten kontaminationsgefährdeten Übertragungsinstrumente in der Praxis. Mit Pro Sleeve und Pro-Tip Turbo trifft der Behandler eine wirkungsvolle Maßnahme, die Richtlinien des RKI umzusetzen und das Risiko einer Kreuzkontamination zu beseitigen. Der Patient wird die hygienische Ausstattung der Spritze als vorbeugende und achtsame Maßnahme seines Behandlungsteams zur Infektionsprophylaxe wahrnehmen.

**LOSER & CO**

Tel.: 02171 706670  
[www.loser.de](http://www.loser.de)

Ultradent Products

## Zahnaufhellung – für alle Fälle


Zahlreich sind die Gründe für Zahnverfärbungen. Geht es z. B. um die sogenannte Altersverfärbungen, sind die Opalescence-Varianten mit Schienen – Opalescence PF und Opalescence Go – für den gesamten Zahnbogen meist die Methoden der Wahl. Doch auch hartnäckigere, tiefsitzende Verfärbungen können erfolgreich beseitigt oder gebessert werden. Sie werden am besten gezielt mit den medizinischen Zahnaufhellungspräparaten behandelt, die in der Praxis eingesetzt werden. Opalescence Boost wird geschlossen angemischt und direkt aus einer Spritze aufgetragen. Eine Lichtaktivierung ist nicht nötig. Üblich sind 2x20 Minuten Auftrag in einer

Sitzung; ggf. wiederholt man dies an einem weiteren Termin. Als Schutz der Gingiva dient ein Streifen des lichterhärtenden OpalDam, der leicht wieder entfernbar ist. Devitale Zähne hellt man effektiv und schnell mit Opalescence Endo auf. Diese gebrauchsfertige Aufhellungspaste bringt man direkt aus der Spritze in die Kavität ein und lässt sie dort wirken, gemäß dem „Walking Bleach“-Konzept. Meist genügen schon ein bis drei Tage Einwirkzeit.

**Ultradent Products**

Tel.: 02203 359215  
[www.ultradent.com](http://www.ultradent.com)

Infos zum Unternehmen

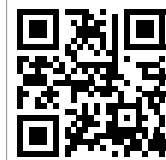

Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.

COLTENE

## Tiefgehende Lösung

Für die klassische Füllungstherapie wünschen sich Zahnärzte seit Langem ein ökonomisch zu verarbeitendes Material zur verlässlichen Versorgung großer Kavitäten. Vor allem im kaulasttragenden Seitenzahnbereich stabilisiert ein moderner Werkstoff im Idealfall den Zahn von innen. Der Wegfall mehrerer Zwischenschritte reduziert zudem die Fehleranfälligkeit und spart wertvolle Behandlungszeit. Mit dem neuartigen Universalkomposit Fill-Up! bietet der Schweizer Dentalspezialist COLTENE ab sofort ein innovatives Füllungsmaterial an. Aufgrund seiner dualhärtenden Eigenschaft können dank Fill-Up! nun Füllungen in beliebiger Schichtstärke realisiert werden, auch ohne zusätzliche Deckschicht. Das zahnfarbene, fluoreszierende und radiopake Material ist damit



das erste echte Bulk-Fill-System auf dem europäischen Markt, das vollständig und zuverlässig bis zum Kavitätengrund durchhärtet. Die chemische Selbsthärtung senkt den Schrumpfstress bedeutend und beugt gleichzeitig Randspalten und postoperativen Sensitivitäten vor. Konventionelle, rein lichthärtende Füllungsmaterialien sind im Vergleich dazu in ihrer Durchhärtetiefe schnell limitiert.

**Coltene/Whaledent  
GmbH + Co. KG**

Tel.: 07345 805-0  
www.coltene.com

SHOFU

## Ein Bulk, zwei Viskositäten, viele Möglichkeiten



Ob fließfähig oder stopfbar: BEAUTIFIL-Bulk von SHOFU besteht bei einer Polymerisationstiefe von mindestens 4 mm nicht nur durch eine sehr niedrige Schrumpfung und Schrumpfspannung, sondern auch durch seine Ästhetik und Farbanpassung an die natürliche Zahnschubstanz. Aufgrund des bioaktiven S-PRG-Fülleranteils besitzt das multifunktionale, röntgenopake Komposit der Giomer-Kategorie zudem präventive Eigenschaften wie Fluoridaufnahme und -abgabe, Säureneutralisation und Dentinremineralisierung. Das niedrigvisköse BEAUTIFIL-Bulk Flowable, das in den Farben Universal und Dentin erhältlich ist, lässt sich direkt aus der Spritze applizieren. Es eignet

Infos zum Unternehmen



sich als Unterfüllungsmaterial für Klasse I- und II-Kavitäten und als Liner und Füllungsmaterial für kleine Seitenzahnkavitäten. BEAUTIFIL-Bulk Restorative wird in den Farben Universal und A in Spritzen à 4,5 g angeboten. Es lässt sich gut modellieren und ist mit einer Druckfestigkeit von 340 MPa okklusal belastbar. Seine pastöse Konsistenz macht es ideal für direkte Seitenzahnrestorationen. Mit dem Komposit

schließen sich Ästhetik, Sicherheit und Effizienz bei Bulk-Fill-Restorationen nicht mehr aus. Denn seine spezielle Füllerstruktur und sein Glaskern sorgen für eine natürliche Lichtstreuung und -durchleitung und damit für einen ausbalancierten Chamäleoneneffekt sowohl im Dentin- als auch im Schmelzbereich.

**SHOFU Dental GmbH**

Tel.: 02102 8664-0  
www.shofu.de

Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.

# pola office+

SCHONENDES UND  
STARKES IN-OFFICE  
BLEACHING-SYSTEM



- Hocheffizientes In-Office-Bleaching
- Gingivaschutz nicht mehr notwendig
- Einfachste Anwendung
- Desensibilisierung integriert
- Deutlich weniger Empfindlichkeiten
- Beste Ergebnisse für glückliche Patienten
- Jetzt Gratis-Demo in Ihrer Praxis anfordern

NEUE  
FORMEL



MIT  
NUR

6%

WASSERSTOFFPEROXID  
STRAHLEND WEISS



Your Smile. Our Vision.

www.sdi.com.au  
www.polawhite.com.au  
www.facebook.com/sdi.germany

SDI Germany GmbH  
Hansestrasse 85 D-51149 Köln  
Free phone: 0800 100 5759

Telefon: +49 (0) 2203 9255 0  
Fax: +49 (0) 2203 9255 200  
Email: Germany@sdi.com.au