

Wer Gates Glidden mag, wird begeistert sein

Komet hat sein Endodontiesortiment um ein weiteres Qualitätsprodukt, den Opener OP10L19 aus Nickel-Titan, erweitert.

Was macht den Erfolg einer Wurzelkanalbehandlung eigentlich aus? Experten sind sich einig, dass dies nicht von einem einzelnen, sondern vom Zusammenspiel aller Arbeitsschritte abhängt, jeder für sich gewissenhaft durchgeführt. Komet pflegt den Systemcharakter seiner Produkte auch in der Endodontie und fügte dem schlüssigen Endo-Produktportfolio nun den Opener OP10L19 hinzu – ein Instrument für die koronale Erweiterung des Wurzelkanals. Ein wichtiger Arbeitsschritt, der aus mehreren Gründen zu empfehlen ist:

Im ersten koronalen Drittel befinden sich die meisten Bakterien, die durch den Einsatz des Openers eliminiert werden. Nachfolgende Instrumente transportieren das koronal infizierte Gewebe also nicht nach apikal, sondern werden vielmehr durch die vorbereitende Massnahme geschont. Der Anwender erhält ein erweitertes Sichtfeld – optimiert durch Mikroskop bzw. Lupe – und damit ein rundum sicheres Gefühl bei der Behandlung.

Kurz und flexibel

Durch seinen Doppel-S-Querschnitt und den Werkstoff Nickel-Titan zeigt der neue Opener eine angenehme Flexibilität trotz Grösse 030 und Taper 10. Dadurch passt er sich wunderbar der Wurzelkanalanatomie an. Der Einsatz ist für das erste koronale Drittel indiziert. Dort sorgt er für einen schnellen und gründlichen Abtrag. Sollte er versehentlich im zweiten Drittel eingesetzt werden, so richtet dies im Regelfall keinen Schaden an.



Dank der kurzen Instrumentenlänge lässt sich der Opener auch sehr gut im Molarenbereich einsetzen und bietet kaum Raum für Überpräparationen.

Tipps für die Anwendung

Der Opener wird im ersten koronalen Drittel in „picking-motion“, also in kurzen Auf- und Abwärtsbewegungen eingesetzt. Indem der Anwender ihn zudem leicht an die Kanalwand drückt und in koronale Richtung wegzieht, hat er die Möglichkeit, grosszügig zu erweitern. Der von Komet sterilgelieferte Opener kann für die Behandlung von bis zu acht Wurzelkanälen eingesetzt werden und ist durch einen blauen ISO-Farbring deutlich gekennzeichnet.

Arbeiten mit System

Für weiterführende Informationen können die umfangreiche Endo-Broschüre und der Endo-Abrechnungsleitfaden online eingesehen und bestellt werden. Damit wird das Endo-Sortiment erneut erweitert, das Service-Konzept gelebt und das von Komet gewohnte System- und Qualitätsdenken unterstrichen. **ET**

**Komet Dental
Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG**

Vertrieb:
Rodent AG
Tel.: +41 71 763 90 60
www.rodent.ch

Performance meets Mobility

VDW.CONNECT kombiniert moderne Kommunikationstechnologie mit leistungsstarker Darstellung.

Der ergonomisch ausbalancierte Endomotor VDW.CONNECT Drive™ wird vom iPad mini aus per Bluetooth gesteuert. Mit der VDW.CONNECT App steht ein breites Spektrum an praxisrelevanten Anwendungen für die rotierende und reziproke Aufbereitung zur Verfügung. Bewegungsfreiheit, intuitive Bedienung und individuelle Profile bieten ein Höchstmass an Flexibilität und Effizienz. Das innovative Konzept begleitet den Nutzer in die Zukunft, denn VDW.CONNECT ist updatefähig und modular um weitere Funktionen und Services erweiterbar.

Die Aufbereitung mit RECI-PROC® ist auch mit direkter Steuerung am Handstück ohne iPad möglich. Das drehbare Winkelstück mit kleinem Kopf sorgt für ein erweitertes

Vorführung auf dem SSO-Kongress in Montreux im Mai



Sichtfeld und einen bequemen Zugang. Der leistungsstarke Lithium-Ionen-Akku ermöglicht bis zu 16 Behandlungen in Folge. Die Funktionen Auto-Stopp-Reverse bei Erreichen der Drehmomentgrenze und RECI-PROC REVERSE bieten zusätzlich einen hohen Sicherheitskomfort. **ET**

VDW GmbH
Tel.: +41 79 826 27 12
www.vdw-dental.com

Ein wahrer Endodontie-Experte

TENEO, die Premium-Behandlungseinheit von Sirona.

Höchsten Komfort und optimale Workflow-Unterstützung bei allen Behandlungen bietet die Behandlungseinheit TENEO von Sirona. Die zahlreichen integrierten Funktionen wurden jetzt um innovative Features, vor allem für die Endodontie, erweitert.

Behandlungseinheiten von Sirona stehen für maximale Behandlungseffizienz. Das gelingt bei TENEO vor allem durch die Integration von zahlreichen Funktionen, wofür sonst zusätzliche Geräte, Fusschalter oder sogar spezielle Behandlungszimmer nötig sind. Die Behandlungseinheit TENEO ist – so gewünscht – mit speziellen Features für die Endodontie ausgestattet. Neben einer umfassenden Feilenbibliothek gehört auch ein integrierter Apex-Locator dazu.


Die zur IDS 2015 vorgestellten Neuerungen machen TENEO jetzt zu einem wahren Endo-Experten: Erstmals werden in die Feilenbibliothek einer Behandlungseinheit die reziproken Feilensysteme von VDW (RECIPROC®) und DENTSPLY



Digitale Vernetzung und Integration von Funktionen – das macht die neue Generation von Behandlungseinheiten von Sirona aus.

Maillefer (WaveOne®) integriert. Auch diese neue Funktion wird über die TENEO-Bedienoberfläche angezeigt und lässt sich über den Fusschalter der Einheit einfach und auf gewohnte Weise steuern.

Neu – und auf Wunsch bereits Teil der Behandlungseinheit – ist das Endo-Winkelstück mit LED-Licht. Es

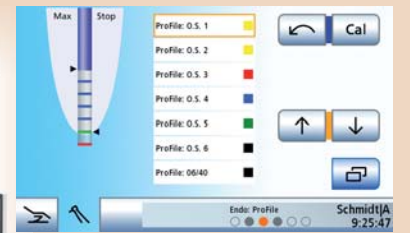

Durch die Integration umfangreicher Funktionen wird die TENEO-Behandlungseinheit zu einem Spezialisten in Sachen Endodontie: Zusatzgeräte sind hier nicht mehr nötig. Das Bild zeigt den Einstiegsdialog mit dem integrierten ApexLocator.

erlaubt eine verbesserte Sicht auf den Behandlungsbereich und gibt dem Behandler noch mehr Sicherheit.

Die integrierte USB-Schnittstelle ermöglicht darüber hinaus das Nachrüsten künftiger technologischer Neuerungen, etwa weiterer Feilenbibliotheken. **ET**

Sirona Dental GmbH

Tel.: +43 662 2450-0
www.sirona.com

ANZEIGE



ZWP online Newsletter

Neues Design für noch mehr Lesekomfort auf PC, Tablet und Smartphone.



www.zwp-online.info/newsletter

ZWP online
FINDEN STATT SUCHEN

Schichten Sie noch oder füllen Sie schon?

Bulk Fill¹



Liner



Milchzähne




Endo Verschluss¹



SDR[®]

Smart Dentin Replacement

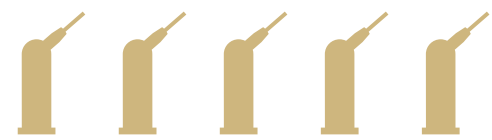

5 JAHRE

ÜBER 30 MIO. ANWENDUNGEN

„Der Goldstandard der Bulk Fülltechnik“*



For better dentistry

DENTSPLY

Weitere Informationen: www.dentsply.de/SDR oder DENTSPLY Service-Line 00800-00735000 (gebührenfrei).