


# FRESH CLEAR

## Abformsilikon im Test

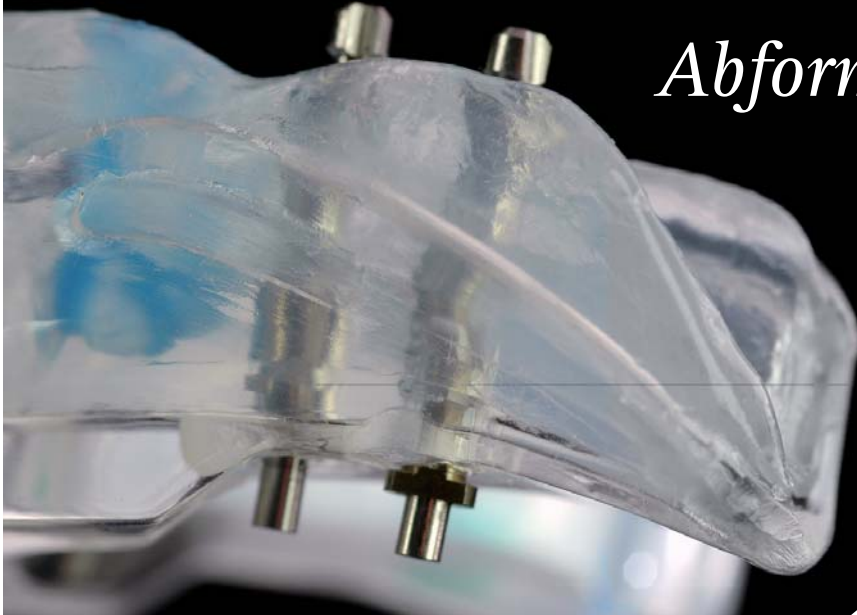

Stefanie Lüers

Eine perfekte Sichtkontrolle während des gesamten Abformprozesses verspricht Dreve für die Verwendung des transparenten Fresh clear Abformsilikons. Wir waren gespannt und haben dieses innovative Silikon gleich ausprobiert.




Stefanie Lüers

### ➤ KONTAKT

zahnRedaktion  
Stefanie Lüers  
Tel.: 01 71/9 95 78 76  
E-Mail:  
s.lueers@zahnredaktion.de

»» Durch das Kartuschensystem lässt sich Fresh clear komfortabel im richtigen Anmischverhältnis in die mitgelieferten Abformlöffel füllen. Apropos Abformlöffel – um die Transparenz des Abformmaterials nicht durch einen undurchsichtigen Metalllöffel zu unterbrechen, verwenden wir Border-Lock Abformlöffel. Hierbei handelt es sich um durchsichtige Kunststoff-Löffel nach Prof. Schreinemakers, die man durch Beschleifen noch etwas individualisieren kann. Auch für Implantate lassen sich die Border-Lock Abformlöffel an gewünschter Stelle perforieren. So kann man für jeden Patienten einen passenden Löffel dieses Systems auswählen. Die Applikation am Patienten gelingt durch die Transparenz des Materials sehr einfach: Wir waren positiv überrascht, wie gut und präzise wir die Einschubrichtung kontrollieren konnten und wussten schon während des Aushärtvorgangs, dass die Abformung gelungen ist. Unnötiges Verpressen, welches gerade Anfängern wie uns oft widerfährt, ist durch Fresh Clear nahezu auszuschließen. Man kann sich gut vorstellen, dass gerade bei Implantatabformungen diese Sichtkontrolle einen großen Vorteil darstellt. Die Verarbeitungszeit von rund 90 Sekunden reicht super aus, um die Abformung korrekt zu applizieren. Nach nur zwei Minuten kann das ausgehärtete Material aus dem Mund entnommen werden. Bei der Entformung hält Fresh clear seine versprochenen

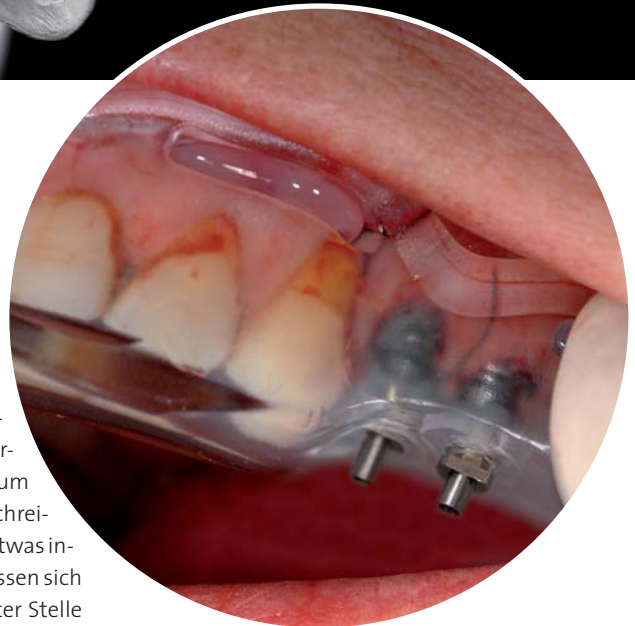

Eigenschaften, wie die hohe Reißfestigkeit und -dehnung, ein. Die Abformung lässt sich leicht aus dem Patientenmund entnehmen. Selbst der Patient beschreibt das Material als relativ angenehm und vor allem geschmacksneutral.

Die Abformung zeigt eine gute Zeichnungsgenauigkeit und durch das automatisierte Anmischen lassen sich kaum Blasen finden, die die Präzision beeinträchtigen könnten.

Fresh clear ist ein additionsvernetztes Monophasensilikon und daher sicher nicht für jede Abformungsart einsetzbar. Für das spezielle Indikationsgebiet der Implantologie ist es aber als sehr gute Alternative zu „etablierten“ Materialien denkbar, da man sich die Transparenz für die sehr präzise Kontrolle der Führung über die Implantate zunutze machen kann. <<<

# 5 Sterne de Luxe

★ Comfort ★ Design ★ Leistung ★ Qualität ★ Preis

 Ritter®

Sie erhalten wahlweise eine Wii-Spielkonsole (Basis-Paket) oder ein LCD-Fernseher nur bei AUSLIEFERUNG DES AKTIONSANGEBOTES BIS SPÄTESTENS 31.12.2009

★★★★★

ContactLite Comfort in TOP-Ausstattung:

Arztelement und Stuhl:

- 1 x Turbineneinrichtung mit Licht
- 2 x Micromotoren Ritter mit Licht
- 1 x Zahnsteinentfernungsgerät
- 1 x 6-Funktionspritze
- 1 x OP-Lampe
- Ritter Planet Lite
- 1 x Multifunktions-Fußanlasser

Helferinnenelement:

- Speibecken, herausnehmbar und desinfizierbar
- Spraynebelsauger und
- Speichelsauger
- 3-Funktionspritze
- Entkeimungssystem Ritter ABS

- + Mundspülbeckenventil
- + Einheit inkl. Montageblech



Abb. ähnlich

Auch in Version S (Schwingbügel) und C (Cart) verfügbar!



# 19.950,-

AKTIONSPREIS in EURO, zzgl. gesetzl. MwSt.

BEI BESTELLUNG DES AKTIONSANGEBOTES BIS SPÄTESTENS 31.12.2009

Zusatzpakete - bei Bedarf zubuchbar:

Multi-Package mit Kamera Sopro 617 und Monitor Neovo 17", zzgl. 3.999,- EUR

Comfort-Paket mit -Selektivablage Cattani, WEK Metasys und Instrumenten- und Spülglasheizung, zzgl. 2.222,- EUR

(Listenpreis 27.642,- EUR)



Made in Germany

Alle Preise verstehen sich zzgl. Montage und der gesetzl. MwSt., inkl. Verpackung und Versand Deutschland. Abweichungen zwischen Muster und Originaloberfläche sind technisch bedingt. Änderungen zur technischen Weiterentwicklung vorbehalten. Bilder stimmen nicht mit Basisausstattung überein. © Ritter 2009. Alle Rechte vorbehalten. Hier verwendete Kennzeichen und Marken sind geschützte und eingetragene Warenzeichen bzw. Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.

Ritter® Concept GmbH  
Bahnhofstr. 65  
08297 Zwönitz

Tel. 037754 / 13-400  
Fax 037754 / 13-280  
info@ritterconcept.com  
www.ritterconcept.com



Exklusivangebot - nur über die dental bauer gruppe  
www.dentalbauer-gruppe.de