



## „Bleaching to go“

„Opalescence Go® passt in unser Gesamtkonzept. Besonders bei jungen Patienten und in Kombination mit dem In-Office-Bleaching kommt das Produkt zur Anwendung. Aufgrund des Preises und der guten Handhabung ist die Nachfrage hoch.“



Zahnzentrum Lippe, Detmold  
Cornelia-Ulrike Wiertz, Hygienikerin und Praxismanagerin



© Fotos: Ultradent Products



Opalescence Go® mit einem Wasserstoffperoxidgehalt von 6% ist besonders für Bleaching-Einsteiger und zur Erhaltung des Effektes bereits erfolgter Zahnaufhellungen geeignet. Das „Bleaching to go“-Produkt kann nach Anamnese und Erstanwendung in der

Praxis bequem mit vorgefertigten UltraFit Trays zu Hause gehandhabt werden. Die gefüllten Schienen, erhältlich in den Geschmacksrichtungen „Mint“ und „Melon“, passen sich optimal der individuellen Zahnreihe an und reichen von Molar zu Molar. Die aufwendige und Kosten verursachende Anfertigung von Tiefziehschienen entfällt. Opalescence Go®

**Ultradent Products**  
[Infos zum Unternehmen]

verbleibt an fünf bis zehn Tagen für jeweils 60 bis 90 Minuten bis zum gewünschten Ergebnis im Mund des Patienten. Nach der Anwendung ist das Gel leicht entfernbar. Fluorid und Kaliumnitrat sorgen durch die Stärkung des Zahnschmelzes und den Schutz vor Zahnsensibilitäten für eine verbesserte Zahngesundheit. Eine schnelle und unkomplizierte, zugleich aber professionelle Zahnaufhellung ist somit gewährleistet. Die Patientenbindung und -compliance wird auf diese Weise dauerhaft verbessert.

**Ultradent Products**



Tel.: 02203 3592-0  
www.ultradent.com

## Polierpaste bietet äußerst schonende Pflege der Zähne

Hochwertige Implantate und deren Aufbauten aus Keramik, Kunststoff oder Metall benötigen, ebenso wie natürliche Zähne, ein effektives Biofilmmangement. Deshalb ist eine stetige professionelle Pflege sehr wichtig. Dies kommt der Gesundheit der

Gingiva und der natürlichen Zähne ebenso zugute, wie dem ästhetischen Gesamtbild. Mit der Polierpaste REMOT implant werden Implantate, deren Aufbauten und auch alle empfindlichen Oberflächen, optimal und äußerst schonend gepflegt. Der sehr niedrige RDA-Wert von <7\* garantiert dabei die nötige Sicherheit.



**lege artis**  
[Infos zum Unternehmen]

\* Methode nach Stookey/Schemehorn mit Referenzsubstanz Bimsstein für Prophylaxepasten.

Literatur: Stookey GK, Schemehorn BR: A Method for Assessing the relative Abrasion of Prophylaxis Materials. J Dent Res 1979; 58:588.

Erhaltene RDA-Werte: <7 für „REMOT implant“ und 7 für Produkt „P“ Abrasionsgrad fein (rosa).

**lege artis Pharma GmbH + Co. KG**

Tel.: 07157 5645-0  
www.legeartis.de

## Parodont Zahnfleischpflege-Gel jetzt im VSHOP

Direkt aus der VOX-Show „Die Höhle der Löwen“ in den VSHOP. Der Onlineshop vshop.de von van der Ven-Dental liefert ab sofort das Parodont Zahnfleischpflege-Gel von Dr. Ismail Özkanli exklusiv im hochwertigen Karton-Display. Das aus dem TV bekannte Produkt ist eine sinnvolle Ergänzung für das Prophylaxe-Sortiment jeder Zahnarztpraxis.

Dr. Ismail Özkanli präsentierte das Parodont Zahnfleischpflege-Gel in der Gründer-Show des TV-Senders VOX so überzeugend, dass für alle Juroren sofort feststand: Das Produkt kann nur erfolgreich werden. Der Berliner Zahnmediziner verwendet das Zahnfleischpflege-Gel schon seit 2005 in seiner Praxis. Für die Rezeptur forschte er zwölf Jahre lang. Das Ergebnis: Ein Zahnfleischpflege-Gel, welches das Zahnfleisch bei Parodontitis, Zahnfleischbluten und Entzündungen pflegt. Es bewirkt, dass sich das Zahnfleisch wieder an den Zahn heftet und ihn dauerhaft schützt. Das Gel basiert auf entzündungshemmenden und antibakteriellen Schwarzkümmel-Öl. Die Medizinische Hochschule Hannover und das „proDERM Institut für Angewandte Dermatologische Forschung“ haben die antibakterielle Wirkung und die Reduktion des Zahnfleischblutungsindex in Studien bestätigt.

Unter vshop.de ist das Parodont Zahnfleischpflege-Gel in einem hochwertigen Karton-Verkaufsdisplay mit 24 Tuben je 10 Milliliter Packungsgröße exklusiv für Zahnarztpraxen erhältlich. Der Einkaufspreis beträgt 3,48 Euro netto; der empfohlene Verkaufspreis 4,99 Euro



brutto pro Tube. Sabrina Sander, Bereichsleitung Materialverkauf bei van der Ven rät: „Mit Parodont können Sie als Zahnärztin oder Zahnarzt Ihr Prophylaxesortiment um ein innovatives Produkt erweitern. Es zeigt, dass Sie auf natürliche Prophylaxe setzen – das stärkt das Vertrauen der Patienten in Ihre Praxis.“

van der Ven – Dental GmbH & Co. KG

Tel.: 02102 1338-0

www.vshop.de

## Ultraschall-Scaling – gründlich und angenehm

Im Bereich der Prophylaxe und Parodontologie ist der Piezo Scaler Tigon+ aus dem Hause W&H das Gerät der Wahl. Unverzichtbar zur Entfernung von supragingivalem Zahnstein und subgingivalen Konkrementen empfiehlt es sich darüber hinaus auch für die endodontische Anwendung und Präparation von Zahnhartsubstanzen. Ein großes anwenderfreundliches Display und fünf voreingestellte Programme reduzieren die Dauer der Behandlung und gestalten diese effektiv und sicher. Die drei Modi des

Ultraschall-Scalers variieren von sanft bis kraftvoll und garantieren somit die richtige Einstellung für jeden Patienten. Diese wissen besonders die temperierte Flüssigkeit zu schätzen, mit der eine reizlose Behandlung auch dann garantiert ist, wenn Zahnfleisch und Zähne empfindlich sind. Die Temperaturregulation ist in drei Stufen möglich, bei Bedarf kann die Heizung jedoch komplett ausgeschaltet werden. Der Tank verfügt über eine Reserveanzeige und ist selbstverständlich thermodesinfizierbar und sterilisierbar. Zudem wird der Piezo Scaler Tigon+ mit zwei qualitativ hochwertigen W&H-Spitzensets geliefert. Die Spitzen sind bestens auf das Ultraschallgerät abgestimmt und lassen sich mit dem Spitzenwechsler bequem austauschen. Nicht zuletzt sorgt der fünffache LED-Ring am Handstück für besten Durchblick, Kontrastsehen wie bei Tageslicht und die exakte Zahnfarbestimmung. Die Ergebnisse können sich sehen lassen – so funktioniert Tigon+.



W&H Deutschland GmbH

Tel.: 08682 8967-0

www.wh.com


## Professionelle Zahnreinigung mit System

Dürr Dental steht für Premium-Qualität bei Produkten und Service in vielen Bereichen des zahnärztlichen Alltags. Nun hat das Unternehmen sein Angebot in die professionelle Prophylaxe ausgeweitet – und dies mit einer eigenständigen Marke: Lunos®.

Aus dem Hause des weltweit agierenden Dentalspezialisten sind unter anderem die Dürr Dentalkompressoren und Sauganlagen, die Dürr System-Hygiene, bildgebende Systeme inklusive der Dürr Dental Imaging Software oder das Ultraschallsystem Vector bekannt und als Top-Produktlinien anerkannt. Ihre Namen verweisen traditionell auf die Unternehmensgründer Karl und Wilhelm Dürr. Ihr hoher Anspruch leitet die Mitarbeiter heute wie damals und zeigt sich insbesondere auch im aktuell neuen Bereich Prävention und Therapie. Unter dem Motto „Das Beste hat System“ eröffnen sich hier ganz neue Möglichkeiten. Dabei stehen das partnerschaftliche Verhältnis zwischen Unternehmen und Praxis sowie aufeinander abgestimmte Produkte ganz oben. Da versteht es sich von selbst, dass bei der Entwicklung von Beginn an höchste Ansprüche an die medizinische Qualität, an die komfortable Anwendung und an die Patientenzufriedenheit gestellt worden sind.



Das Prophylaxeteam kann die Vorteile des neu eingeführten Premium-Prophylaxesystems ab sofort nutzen. Das Portfolio reicht von der Mundspüllösung, dem Pulverstrahlhandstück mit einzigartigem Wechselkammerprinzip über unterschiedliche Pulver und Pasten bis hin zum Wellness-Tuch – eine neue Welt für die Zahnarztpraxis und für Dürr Dental!

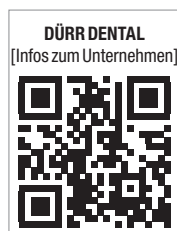

**DÜRR DENTAL AG**  
Tel.: 07142 705-0  
www.duerrdental.com

## Biomimetisches Wirkprinzip hilft bei schmerzempfindlichen Zähnen

Ein Eis oder ein heißes Getränk? Bei schmerzempfindlichen Zähnen keine gute Idee. Betroffene spüren einen ziehenden, oft mehrere Sekunden anhaltenden Schmerz, der wie ein Blitz durch



den Kiefer schießt. In der kalten Jahreszeit treten bei Spaziergängen zudem oft Probleme durch die eisige Luft auf. Laut wissenschaftlichen Studien ist mehr als jeder zweite Erwachsene betroffen.<sup>1,2</sup> Die Lebensqualität ist häufig stark eingeschränkt. Abhilfe schaffen naturnahe Wirkstoffe, die offene Dentinkanälchen, die wiederum durch Schmelzabnutzung oder Zahnfleischrückgang entstehen, verschließen, den Zahnschmelz remineralisieren und schützen.<sup>3-5</sup>

Zahnfleischrückgang ist ein Prozess, der durch Parodontitis oder den normalen Abnutzungsprozess im Alter bedingt ist und in dessen Folge sich freiliegende Zahnhälse einstellen.<sup>6</sup> Ohne schützende Zwischenschicht werden Temperaturschwankungen nun direkt an den Zahnnerv weitergeleitet und als Schmerz wahrgenommen.<sup>2</sup> Zahlreiche wissenschaftliche Studien – jüngst im renommierten Journal *Clinical Oral Investigations* – belegen, dass Zahnpflegeprodukte mit Hydroxylapatit (z. B. in Biorepair Zahncreme sensitiv) in den meisten Fällen innerhalb weniger Tage Abhilfe schaffen.<sup>7,8</sup>

Biorepair bekämpft die Ursache schmerzempfindlicher Zähne mit künstlichem Zahnschmelz: Zink-Carbonat-Hydroxylapatit (microrepair). Diese Biorepair-Kristallite verschließen die offenen liegenden Dentinkanälchen und verbinden sich mit der Oberfläche des Zahnschmelzes.<sup>8,9</sup> Durch das biomimetische Wirkprinzip repariert Biorepair die Zahnschmelzoberfläche auf natürliche Weise – bei zweimaliger Anwendung pro Tag. Durch regelmäßige Anwendung von Biorepair kann so bereits nach wenigen Tagen eine spürbare Verbesserung der Beschwerden und der Lebensqualität erzielt werden.<sup>8</sup>



**Dr. Kurt Wolff GmbH & Co. KG**  
Tel.: 0521 8808-00  
www.bio-repair.de

## Prophylaxesortiment mit Marken Young Dental und Zooby

Seit Oktober und noch bis Dezember präsentiert der amerikanische Dentalkonzern Young Innovations sein Sortiment auf zehn europäischen Messen. Besucher können sich auf neue Produkte freuen, darüber hinaus sind einige Topseller zum reduzierten Preis erhältlich.

Sonderkonditionen gelten für Pasten und DPAs von Young Dental und Zooby® sowie für die Parotispflaster DryTips®. Im Angebot sind außerdem die Applikatoren Ultrabrush und TRU von Microbrush®. Die vielseitigen Tools sind biegsam und verharren ohne Rückfederung in der gewünschten Position. Nicht absorbierende Fasern ermöglichen



Abb. 1: Reflective DryTips® von Microbrush®. (Foto: Microbrush) – Abb. 2: Prophylaxeprodukte von Young Dental. (Foto: Young Dental) – Abb. 3: Produkte für die Kinderprophylaxe von Zooby®. (Foto: Zooby)

die hervorragende Aufnahme, Abgabe und präzise Platzierung dentaler Flüssigkeiten. Zum Portfolio von Young Innovations gehören auch Lösungen für die Restauration wie das innovative Matrizensystem ContactPro®

## Info

### Die nächsten Messetermine von Young Innovations:

- ADF Paris, 28.11. – 2.12.2017
- Adventsmarkt Kaladent Schweiz, 2.12.2017
- Berliner Prophylaxetag, 8. und 9.12.2017

oder die Prophylaxepalette von Young Dental mit Polierkelchen, Prophy-Winkelstücken und Pasten für die professionelle Zahnreinigung. Für junge Patienten gibt es die Marke Zooby®. Die kindgerechten Produkte sind dekoriert mit bunten Tiermotiven und sorgen für gute Laune in der Praxis. Ein Plus für jede Behandlung sind Reflective DryTips® von Microbrush®. Die Parotispflaster halten während der Behandlung die Zähne trocken und sind eine ideale Ergänzung zu Speichelsauger und Watterollen, denn die extrem aufnahmefähigen Zellstoffkissen werden an der Wangeninnenseite direkt vor der größten Speicheldrüse platziert. Die Pads sind einseitig mit silbriger Folie beschichtet, die zur Zahnreihe ausgerichtet wird. So entsteht deutlich mehr Helligkeit, etwa für die Anwendung des Mikroskops.



### Young Innovations Europe GmbH

Tel.: 06221 4345442  
www.microbrush.eu  
www.youngdental.eu

## IMPRESSUM

Ein Supplement von **ZWP** ZAHNARZT WIRTSCHAFT PRAXIS

### Verlagsanschrift

OEMUS MEDIA AG, Holbeinstraße 29, 04229 Leipzig, Tel.: 0341 48474-0, kontakt@oemus-media.de, www.oemus.com

<b>Chefredaktion</b>	Dipl.-Päd. Jürgen Isbaner (V.i.S.d.P.)	Tel.: 0341 48474-321	isbaner@oemus-media.de
<b>Redaktion</b>	Antje Isbaner Marlene Hartinger	Tel.: 0341 48474-120 Tel.: 0341 48474-133	a.isbaner@oemus-media.de m.hartinger@oemus-media.de
<b>Anzeigenleitung</b>	Stefan Thieme	Tel.: 0341 48474-224	s.thieme@oemus-media.de
<b>Grafik/Satz</b>	Josephine Ritter	Tel.: 0341 48474-144	j.ritter@oemus-media.de
<b>Druck</b>	Dierichs Druck+Media GmbH & Co. KG, Frankfurter Straße 168, 34121 Kassel		





JEDES LÄCHELN IST DIE ARBEIT VON **ART**



ENTDECKEN SIE **HARMONIZE™**, DAS KOMPOSIT DER NÄCHSTEN GENERATION MIT DER **ADAPTIVE RESPONSE TECHNOLOGY**.

## Harmonize™

Nanohybrid Universal Composite



Harmonize beginnt mit **ART**, **A**daptive **R**esponse **T**echnology, dem Nanopartikel-Füllersystem, das lebensechte Restaurationen **EINFACHER ALS JE ZUVOR** macht.

ART bietet auch bessere Anpassungsmöglichkeiten und gesteigerte strukturelle Integrität, was Ihren Restaurationen **AUßERGEWÖHNLICHE FESTIGKEIT** und **UNVERGLEICHLICHE ÄSTHETIK** verleiht.

Wissenschaft und Schönheit endlich vereint.



**ART**  
Adaptive Response Technology

[www.KerrDental.com](http://www.KerrDental.com)

# GUIDED BIOFILM THERAPY

KARIES-UND PARODONTITIS-PRÄVENTION

DAS ORIGINAL. DAS MASTER.  
THE GAME CHANGER



BUCHEN SIE  
EINE GRATIS  
DEMO UNTER:  
089 4271 610



Das Original vom Erfinder. Garantierte Schweizer Präzision und unvergleichliches Design. Zuverlässigkeit und Know-How seit 1981.

Evidenzbasierte Protokolle für das Biofilm-Management auf Zähnen, Weichgeweben und Implantaten.

## DIE 8 SCHRITTE DES GBT PROTOKOLLS

### 08 NEUER RECALL TERMIN

**GESUNDER PATIENT = GLÜCKLICHER PATIENT**  
 ▶ Bestellen Sie Ihren Patienten risikoabhängig zum Recall  
 ▶ Fragen Sie, wie ihm oder ihr die Behandlung gefallen hat

### 07 QUALITÄTS-KONTROLLE

**PATIENTEN ZUM STRAHLEN BRINGEN**  
 ▶ Prüfen Sie anschließend, ob der Biofilm vollständig entfernt wurde ▶ Stellen Sie sicher, dass Zahnstein und Konkremete vollständig entfernt wurden ▶ Untersuchen Sie Zähne auf kariöse Läsionen ▶ Schützen Sie die Zähne mit Fluorid

### 06 PIEZON®

**VERBLEIBENDEN ZAHNSTEIN ENTFERNEN**  
 ▶ Verwenden Sie supragingival und bis zu 10 mm subgingival das minimalinvasive EMS PS Instrument ▶ Reinigen Sie Taschen >10 mm mit einer Minikürette ▶ Verwenden Sie für Implantate und implantatgetragene Restaurationen das EMS PI Instrument

### 05 PERIOFLOW®

**BIOFILM ENTFERNEN IN TASCHEN >4 BIS 9 MM**  
 ▶ Verwenden Sie PLUS Pulver für natürliche Zähne in tiefen Taschen und Furkationen und an Implantaten ▶ Verwenden Sie die tiefenmarkierten PERIOFLOW® Düsen



### 01 DIAGNOSE

**JEDEN PATIENTEN BEFUNDEN**  
 ▶ Gesunde Zähne, Karies, Gingivitis, Parodontitis  
 ▶ Gesunde periimplantäre Gewebe, Mukositis, Peri-Implantitis ▶ Lassen Sie Ihren Patient zuerst Ihren Patient zuerst mit BacterX spülen

### 02 ANFÄRBNEN

**ANFÄRBNEN UND BIOFILM SICHTBAR MACHEN**  
 ▶ Zeigen Sie Ihrem Patienten den angefärbten Biofilm und die Problemzonen  
 ▶ Die Farbe steuert die Biofilm-Entfernung ▶ Ohne Biofilm ist Zahnstein leichter erkennbar

### 03 MOTIVATION

**INSTRUIEREN UND MOTIVIEREN**  
 ▶ Betonen Sie die Wichtigkeit der Prävention ▶ Empfehlen Sie die tägliche geeignete Mundhygiene mit Philips Sonicare und Interdentalbürsten oder Philips AirFloss Ultra

### 04 AIRFLOW®

**BIOFILM, VERFÄRBUNGEN UND JUNGEN ZAHNSTEIN ENTFERNEN**  
 ▶ Verwenden Sie AIRFLOW® für natürliche Zähne, Restaurationen und Implantate  
 ▶ Entfernen Sie supra- und subgingivalen Biofilm und jungen Zahnstein mit PLUS 14 µm Pulver ▶ Entfernen Sie restliche Schmelz-Verfärbungen mit CLASSIC COMFORT Pulver ▶ Entfernen Sie Biofilm auch von Gingiva, Zunge und Gaumen