

Keramische Werkstoffe finden bereits seit mehr als einem Jahrhundert Anwendung in Zahnmedizin und Zahntechnik. So wurde bereits im Jahre 1889 von Charles Land das Patent für die erste „Vollkeramikkrone“ angemeldet. Diese sogenannte „Land's Crown“ wurde später als „Jacketkrone“ bezeichnet und war letztendlich der Urvorläufer der heutigen Vollkeramikkrone. Durch die Weiterentwicklung der Werkstoffe konnte die Zuverlässigkeit vollkeramischer Restaurationen stetig gesteigert werden.

Vollkeramische Werkstoffe in der CAD/CAM-Anwendung

Autoren: Dr. med. dent. Florian Beuer, Josef Schweiger



Abb. 1: Lithium-Disilikat-Keramikblöcke zeichnen sich durch ihre hohe Biegefestigkeit aus (Darstellung der drei verschiedenen Kristallisationsstufen).

In den Jahren seit 1987 war es durch die Verwendung computergestützter Fertigungsverfahren zudem möglich, auch industriell gefertigte Keramikblöcke für den Herstellungsprozess zu verwenden. Der Einsatz von CAD/CAM-Technologien in Zahnmedizin und Zahntechnik ist zu einem festen Bestandteil in der Herstellungskette für Zahnersatz geworden. War es am Anfang vor allem das Hochleistungsmaterial Zirkoniumdioxid, welches nur durch Fräsen bzw. Schleifen bearbeitet werden konnte, so finden zunehmend auch andere Materialklassen in der computergestützten Fertigung ihre Anwendung. Die Liste von keramischen Werkstoffen für die Bearbeitung durch CAD/CAM-Maschinen ist vom jeweiligen Fertigungssystem abhängig.

Einige Fräsmaschinen sind speziell auf die Fertigung von ZrO_2 -Gerüsten ausgelegt,

während andere Systeme hingegen die komplette Palette keramischer Materialien abdecken, von Glaskeramiken über Infiltrationskeramiken bis hin zu oxidischen Hochleistungskeramiken. Die Vorteile maschinengestützter Fertigung zeigen sich in

einer hohen Materialgüte aufgrund industriell vorgefertigter Rohlinge, einem praktikablen Qualitätsmanagement, in einer jederzeit möglichen Reproduzierbarkeit aufgrund digitaler Daten, in einer drastischen Reduktion der Herstellungskosten und schlussendlich in der Verarbeitung hochinnovativer Werkstoffe. Derzeit lassen sich folgende Keramikwerkstoffe standardmäßig auf dentalen CAD/CAM-Maschinen bearbeiten:

– Glaskeramiken

- Feinstrukturfeldspatkeramiken
- Leuzitverstärkte Glaskeramiken
- Lithium-Disilikat-Keramiken



Abb. 2-4: Dentinkerne von Oberkieferfrontzahnkronen von 13–23 aus IPS e.max CAD Material vor und nach dem Kristallisationsbrand sowie nach der Fertigstellung.



Ostseekongress

2. Norddeutsche Implantologietage

22./23. Mai 2009 in Rostock-Warnemünde » Hotel NEPTUN
Chirurgie & Prothetik – Die zentrale Schnittstelle in der Implantologie

Freitag, 22. Mai 2009

Programm

Live-OP ARTOSS

10.00 – 14.00 Uhr Externer Sinuslift/modernes Knochen- und Gewebemanagement
Dr. Uwe Herzog/Rostock

Seminare für das gesamte Praxisteam

- 10.00 – 15.00 Uhr **A** Versicherungsvertragsgesetz – Neuer Basistarifvertrag – Neue BEB
Iris Wälter-Bergob/Meschede
- 15.30 – 17.00 Uhr **B** Parodontologie Seminar mit Live-Demonstration
Priv.-Doz. Dr. Rainer Buchmann/Dortmund

Firmenworkshops

- 15.30 – 17.00 Uhr 1. Staffel: 1.1 DENTSPLY Friadent | 1.2 BIOMET 3i
1.3 K.S.I. Bauer-Schraube | 1.4 Smile Esthetics/White Veneers – Teil I
- 17.30 – 19.00 Uhr 2. Staffel: 2.1 ARTOSS | 2.2 Degradable Solutions |
2.3 Sybron Implant Solutions | 2.4 SICAT |
2.5 Smile Esthetics/White Veneers – Teil II

Die Teilnahme an den Firmenworkshops ist kostenfrei! (Ausnahme 1.4/2..5)

Parallelveranstaltungen

- 09.00 – 15.30 Uhr Intensivkurs „Unterspritzungstechniken zur Faltenbehandlung im Gesicht“ Dr. Kathrin Ledermann
- 13.00 – 19.00 Uhr Perfect Smile – Das Konzept für die perfekte Frontzahnästhetik Dr. Jürgen Wahlmann/Edewecht
- 20.00 Uhr Abendveranstaltung

Samstag, 23. Mai 2009

Programm

Programm Zahnärzte

09.00 – 18.30 Uhr Wissenschaftliche Vorträge

Referenten: Prof. Dr. Hans Vinzenz Behrbohm/Berlin • Prof. Dr. Klaus U. Benner/Germaring • Prof. Dr. Herbert Deppe/München • Priv.-Doz. Dr. Dr. Steffen G. Köhler/Berlin • Prof. Dr. Bernd-Michael Kleber/Berlin • Priv.-Doz. Dr. Rainer Buchmann/Dortmund • Dr. Dr. Peter Ehrh/Berlin • Dr. Dr. Jens Meier/Bremerhaven • Dr. Anton Friedmann/Berlin • Dr. Christian Hilscher/München

Themen: Ergebnisse lateraler Augmentation mit kreuzvernetzten und nicht vernetzten Kollagenmembranen • Risikogebiet Kieferhöhle – Anatomie und Fehlerquellen • 3-D-Diagnostik sichert langfristigen Implantaterfolg • Indikationsgerechte Paro-Implantologie • Histologische Nachweise der Knochenregeneration nach Ridge/Socket Preservation – krestale Augmentationen mit einem β -TCP Composite • Komplikationen in der Implantologie und prothetisch-chirurgisch komplexe Situationen • Sinuslift mit autogenen Beckenkamm vs. intraoralem Knochen: 10-Jahres-Ergebnisse

Programm Helferinnen

09.00 – 18.00 Uhr Seminar zur Hygienebeauftragten
Iris Wälter-Bergob/Meschede

- Rechtliche Rahmenbedingungen für ein Hygienemanagement
- Anforderungen an die Aufbereitung von Medizinprodukten
- Wie setze ich die Anforderungen an ein Hygienemanagement in die Praxis um?
- Überprüfung des Erlernten

Organisatorisches

Kongressgebühren: Freitag, 22. Mai 2009

Live-OP	150,00 € zzgl. MwSt.
Seminar A/B	55,00 € zzgl. MwSt.
Firmenworkshop 1.4/2.5	95,00 € zzgl. MwSt.
Tagungspauschale*	45,00 € zzgl. MwSt.
Parallelveranstaltungen	
Intensivkurs	150,00 € zzgl. MwSt.
Perfect Smile**	455,00 € zzgl. MwSt.
Abendveranstaltung	
Teilnehmer/Begleitpersonen	kostenlos/45,00 € zzgl. MwSt.

** Mitglieder der DGKZ erhalten 45,- € Rabatt auf die Kursgebühr.

Kongressgebühren: Samstag, 23. Mai 2009

Zahnärzte	100,00 € zzgl. MwSt.
Assistenten (mit Nachweis)	55,00 € zzgl. MwSt.
Helferinnen (Hygieneseminar)	55,00 € zzgl. MwSt.
Tagungspauschale*	45,00 € zzgl. MwSt.

*Die Tagungspauschale beinhaltet Kaffeepausen, Tagungsgetränke und Imbissversorgung und ist für jeden Teilnehmer verbindlich zu entrichten.

Nähere Informationen zum Programm, Workshop- und Seminarinhalte sowie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie auf www.ostseekongress.com

Veranstaltungsort

Hotel NEPTUN, Seestr. 19, 18119 Warnemünde
Tel.: 03 81/7 77-0, Fax: 03 81/5 40 23
www.hotel-neptun.de

Veranstalter/Anmeldung

OEMUS MEDIA AG, Holbeinstr. 29, 04229 Leipzig
Tel.: 03 41/4 84 74-3 08, Fax: 03 41/4 84 74-2 90
event@oemus-media.de
www.oemus-media.de
www.ostseekongress.com

Anmeldeformular per Fax an 03 41/4 84 74-2 90

Für die 2. Norddeutschen Implantologietage melde ich folgende Personen verbindlich an: (Zutreffendes bitte ausfüllen bzw. ankreuzen)

Live-OP	<input type="checkbox"/>	Seminar A	<input type="checkbox"/>
Intensivkurs	<input type="checkbox"/>	Seminar B	<input type="checkbox"/>
Perfect Smile	<input type="checkbox"/>	Hygieneseminar	<input type="checkbox"/>
1. Staffel	_____		
2. Staffel	_____		
Seminare		Workshops	(Bitte ankreuzen)

Titel, Name, Vorname, Tätigkeit

Abendveranstaltung _____ (Bitte Personenzahl eintragen)

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der 2. Norddeutschen Implantologietage erkenne ich an.

Datum/Unterschrift

Praxisstempel



Abb. 5: Mehrere Hersteller bieten zwischenzeitlich auch mehrfarbige Glaskeramikblöcke für die CAD/CAM-Bearbeitung an, hier am Beispiel des VITA TriLux forte Blockes.
(Bild: VITA Zahnfabrik)

– Infiltrationskeramiken

- VITA In-Ceram ALUMINA (Al_2O_3)
- VITA In-Ceram ZIRCONIA (Al_2O_3 , ZrO_2)
- VITA In-Ceram SPINELLI (MgAl_2O_4)

– Oxidische Hochleistungskeramiken

- Zirkoniumdioxid
- Aluminiumoxid

Glaskeramiken

Schleifbare Glaskeramikblöcke werden von mehreren CAD/CAM-Systemen zur Herstellung von Inlays, Onlays, Veneers, Teilkronen und Vollkronen (vollanatomisch, anatomisch teilreduziert) angeboten. Neben monochromen Blöcken bieten verschiedene Hersteller mittlerweile auch mehrfarbig geschichtete Rohlinge an (Vitablocs TriLux [VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen], IPS EmpressCAD Multi [Ivoclar Vivadent, Schaan, FL], inCoris CEREC Blocs PC [Sirona, Bensheim]), um daraus ästhetische, vollanatomische Kronen zu schleifen. Grundsätzlich kann man bei den schleifbaren Glaskeramikblöcken zwischen Feldspatkeramikblöcken (z. B. VITA Mark II, VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen), leuzitverstärkten Glaskeramikblöcken (z. B. IPS EmpressCAD, Ivoclar Vivadent, Schaan, FL) und Lithium-Disilikat-Keramikblöcken (z. B. IPS emaxCAD, Ivoclar Vivadent, Schaan, FL)

unterscheiden. Eine besondere Stellung in der Gruppe der Glaskeramiken nehmen aufgrund der höheren Festigkeitswerte die Lithium-Disilikat-Keramikblöcke ein (Abb. 1), die für vollanatomische Front- und Seitenzahnkronen für Kappen im Front- und Seitenzahnbereich verwendet werden können (Abb. 2 bis 4). Glaskeramiken sind vor allem für die Chairside-Anwendung geeignet, da sie durch zahnähnliche transluzente Eigenschaften auch ohne Verblendung zu ästhetisch ansprechenden Ergebnissen führen. Durch den relativ hohen Glasanteil sind diese Keramiken im Gegensatz zu Oxidkeramiken mit Fluorwasserstoffsäure (HF) ätzbar und können damit hervorragend adhäsiv befestigt werden.

Beispiele für monochrome Glaskeramikblöcke:

- VITABLOCS Mark II (VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen): Feinstruktur-Feldspatkeramikblöcke für Inlays, Onlays, Veneers, vollanatomische Kronen
- inCoris CEREC Blocs (Sirona, Bensheim): Feldspatkeramikblöcke für Inlays, Onlays, Veneers, vollanatomische Kronen
- IPS Empress CAD (Ivoclar Vivadent, Schaan, FL): Leuzitverstärkte Glaskeramikblöcke für Inlays, Onlays, Veneers, vollanatomische Kronen
- IPS e.maxCAD (Ivoclar Vivadent, Schaan, FL): Lithium-Disilikat-Keramikblöcke für vollanatomische Kronen, Kappen für Front- und Seitenzahnkronen

Beispiele für mehrfarbig geschichtete Rohlinge:

- VITABLOCS TriLux (VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen): Feldspatkeramikblöcke für Inlays, Onlays, Veneers, vollanatomische Kronen

- VITABLOCS TriLux Forte (VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen): Feldspatkeramikblöcke mit feinerer Nuancierung des Farbüberganges sowie mehr Chroma und Fluoreszenz im Zervikalbereich. Geeignet für Inlays, Onlays, Veneers, vollanatomische Kronen (Abb. 5)
- IPS Empress CAD Multi (Ivoclar Vivadent, Schaan, FL): Leuzitverstärkte Glaskeramikblöcke mit natürlichem Farb-, Transluzenz- und Fluoreszenzverlauf. Geeignet für Inlays, Onlays, Veneers, vollanatomische Kronen



Abb. 6: 14 Einzelzahnkronenkappen als CAD-Datensatz.

- inCoris CEREC Blocs PC (Sirona, Bensheim): Polychromatische Feldspatkeramikblöcke in drei verschiedenen Farben für Inlays, Onlays, Veneers, vollanatomische Kronen

Infiltrationskeramiken

Schleifbare Blöcke aus Infiltrationskeramiken werden im porösen, kreidigen Zustand bearbeitet und anschließend mit Lanthan-glas infiltriert. Alle Rohlinge für Infiltrationskeramiken stammen aus dem VITA In-Ceram System und werden in drei Variationen angeboten:

- VITA In-Ceram ALUMINA (Al_2O_3) (VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen): Geeignet für Kronenkappen im Front- und Seitenzahn-



Abb. 7: ... nach dem Fräs- und Sintervorgang – **Abb. 8:** ... und fertig verblendet. – **Abb. 9:** Die Indikationsbreite von Zirkoniumdioxid reicht von Gerüstkappen für Einzelzahnkronen und Brückengerüsten bis hin zu Primärteleskopen.

bereich, dreigliedrige Brückengerüste im Frontzahnbereich

- VITA In-Ceram ZIRCONIA (Al_2O_3 , ZrO_2) (VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen): Geeignet für Kronenkappen im Front- und Seitenzahnbereich, dreigliedrige Brückengerüste im Frontzahnbereich und Seitenzahnbereich. Dank des ausgezeichneten Maskierungsvermögens eignet sich diese Keramik hervorragend für stark verfärbte Stümpfe.
- VITA In-Ceram SPINELL (MgAl_2O_4) (VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen): besitzt die höchste Transluzenz aller Oxidkeramiken und empfiehlt sich somit für die Fertigung hoch ästhetischer Frontzahnkronengerüste, insbesondere auf vitalen Zahnstümpfen und bei jungen Patienten.

Oxidische Hochleistungskeramiken

Derzeit werden Aluminiumoxid und Zirkoniumdioxid als Rohlingsblöcke für die CAD/CAM-Technologie angeboten.

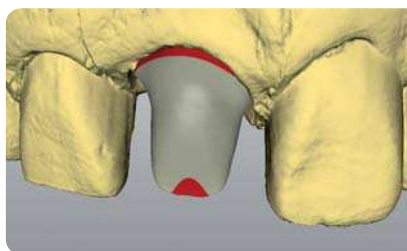


Abb. 10: CAD-Datensatz für ein individuelles Implantatabutment (CARES Implantatabaufbau auf Straumann Tissue Level Implantat). – **Abb. 11:** Der nach den CAD-Daten komplett aus Zirkoniumdioxid gefertigte Implantatabaufbau im Patientenmund (CARES Implantatabaufbau auf Straumann Tissue Level Implantat).

Aluminiumoxid (Al_2O_3)

Diese oxidische Hochleistungskeramik wird in einem vorgesinterten Stadium beschliffen und anschließend bei 1.520 °C im Sinterofen dichtgesintert. Die Indikation für Aluminiumoxid sind Kronenkäppchen im Front- und Seitenzahnbereich, Primärteile und dreigliedrige Frontzahnbrückengerüste. Die geschliffenen Gerüste können mit VITA In-Ceram AL Coloring Liquid in mehreren Farben individuell eingefärbt werden.

Beispiele für schleifbare Aluminiumoxidblöcke:

- VITA In-Ceram AL Block (VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen)
- inCoris AL (Sirona, Bensheim) in einem elfenbeinartigen Farbton (Farbe F 0,7) erhältlich

Yttriumstabilisiertes Zirkoniumdioxid (ZrO_2 , Y-TZP)

Zirkoniumdioxid ist eine oxidische Hochleistungskeramik mit hervorragenden me-

ANZEIGE



Medizinprodukte
aus Hochleistungskeramik

Premiumwerkstoffe und
modernste Fertigungstechnologien

Dentaltechnik
> CAD/CAM-Rohlinge
> Abutments
> Implantate

Pharmazeutische Industrie
> Kolben, Buchsen
> Förderschnecken

Chirurgie
> Implantate

Qualitätsmanagementsystem
nach
DIN EN ISO 13485:2003
für Medizinprodukte



- > **Hersteller: 2,8 Mio. eingegliederte Einheiten**
- > **Abgesicherte biokompatible Qualität**
- > **Konstante Schrumpfungsfaktoren**
- > **Voreingefärbt, ohne Festigkeitsverlust**
- > **Höchste Beständigkeit, großspannige Gerüste**



DOCERAM
MEDICAL CERAMICS



Made in Germany

Certified Company

DIN EN ISO 9001:2000

MOESCHTER GROUP

Hesslingsweg 65 – 67
D - 44309 Dortmund
Phone: +49 (0) 231/92 56 68 0
www.doceram-medical.com

IDS Köln
(H 11.2/K 058)

> **“Gesund durch Keramik”**
perfekte Technik - perfektes Aussehen!

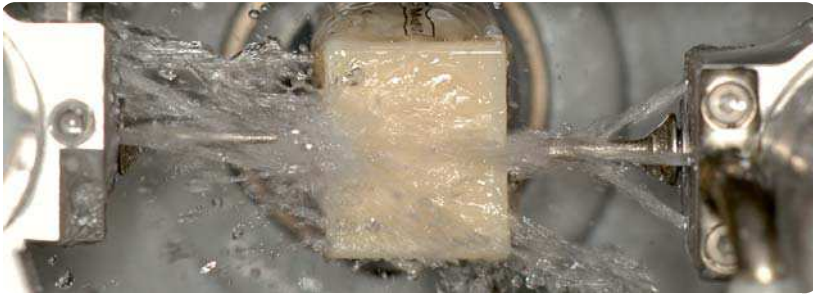


Abb. 12: Die CAD/CAM-Bearbeitung kann mit...

mechanischen Eigenschaften. Die hohe Biegefestigkeit und die unter Dentalkeramiken extrem hohe Risszähigkeit bieten die Möglichkeit, diesen Werkstoff als Gerüstmaterial für Kronen, Brücken und Primärteleskope (Abb. 6 bis 9) sowie, bei korrekter Indikationsstellung, für individuelle Implantat-Abutments zu verwenden (Abb. 10).

Die Zugabe von 3 Mol% Y_2O_3 führt zu einer metastabilen tetragonalen Phase bei Raumtemperatur, die durch einen Übergang in eine monokline Phase das Fortschreiten von Rissen in der Keramik verhindert und somit die hohe Risszähigkeit bewirkt (Umwandlungs- oder Transformationsverstärkung).

Beispiele für Zirkonoxid-Blöcke:

- Lava Frame (3M ESPE, Seefeld)
- Cercon smart ceramics (DeguDent, Hanau)

- Everest ZS und ZH (KaVo, Biberach)
- inCoris ZI (Sirona, Bensheim)
- In-Ceram YZ (VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen)
- zeron (Straumann etkon, Gräfelfing)
- ZENO Zr (WIELAND Dental + Technik, Pforzheim)

„CAD in practice“

Grundsätzlich kann zwischen drei verschiedenen Fertigungsmöglichkeiten in der dentalen CAD/CAM-Anwendung unterschieden werden.

Diese sind:

- Chairside-Fertigung
- Labside-Fertigung
- Zentrale Herstellung im Fertigungszentrum

Alle drei Varianten zeigen sowohl Vor- als auch Nachteile. Vollkeramische Materi-

beutung mit oder ohne Wasserkühlung erfolgt (Abb. 12 und 13). Glaskeramische Werkstoffe können ausschließlich unter Wasserkühlung bearbeitet werden, da ansonsten das Material und die Schleifkörper geschädigt würden.

Indikationen

Das Anwendungsspektrum für vollkeramische Werkstoffe erstreckt sich mittlerweile vom klassischen „Keramikinlay“ bis hin zu mehrgliedrigen Brückenrestorationen. Trotzdem ist es nach Ansicht der Autoren unbedingt notwendig, sich streng an die Empfehlungen und Freigaben der jeweiligen Hersteller zu halten.

Präparationsrichtlinien

Die Präparationen für keramische Restaurationen unterscheiden sich je nach verwendetem Material. Ein gemeinsames Merkmal ist jedoch die sog. keramikgerechte Präparation, mit gerundeten Kanten ohne scharfe Übergänge. Für Zirkoniumdioxideinzelkronen sollte eine Gerüststärke von 0,5 mm (im Frontzahnbereich 0,3 mm) und ein Platzbedarf von 0,5–1,0 mm für die Verblendung eingeplant werden. Die Stufenpräparation mit innengerundeter Kante stellt die Präparationsgrenze der

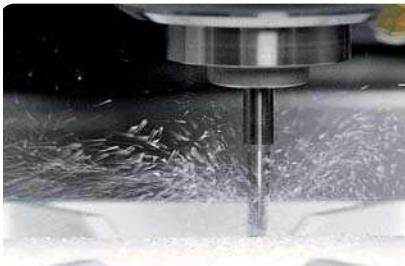


Abb. 13: ... oder ohne Wasserkühlung erfolgen (Bildquelle 3M ESPE). – Abb. 14: Indikationsgerechte Präparation für vollkeramische Frontzahnkronen (Konvergenzwinkel 12°, Mindestwandstärke 1,0 mm zirkulär, 1,5 mm inzisal). – Abb. 15: Keramische Inlays aus Feldspatkeramikblöcken und leuzitverstärkten Glaskeramikblöcken werden 60 Sekunden mit HF-Gel geätzt (Restaurationen aus Lithium-Disilikat-Blöcken dagegen 20 Sekunden).



Abb. 16: Glaskeramisches MOD-Inlay nach dem Einsetzen mit Kompositüberschüssen.

alien können dabei mit jeder der drei Fertigungsmethoden bearbeitet werden. Allerdings zeigen sich wesentliche Unterschiede in der Materialvielfalt, sodass bei einigen Systemen sowohl Glas-, Infiltrations- als auch oxidische Hochleistungskeramiken zur Anwendung kommen, während andere Systeme ihren Fokus auf die Bearbeitung von Zirkoniumdioxid legen. Dies hängt vor allem davon ab, ob die Bear-

wahl dar. Die ausgeprägte Hohlkehle, die ebenso viel Zahnhartsubstanzabtrag erfordert, ist der Stufe als Präparationsgrenze unterlegen. Zur Erzielung einer möglichst guten primären Passung ist ein Präparationswinkel von 8–12° geeignet. Die Inzisalkante des präparierten Stumpfes sollte mind. 1 mm betragen, um ein optimales Ausschleifen des Inzisalbereiches während der CAD/CAM-Bearbeitung zu ermöglichen.

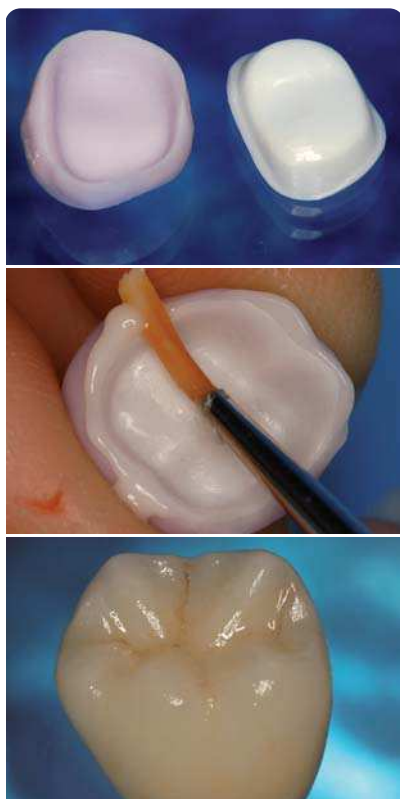


Abb. 17–19: Die verschiedenen Fertigungsstufen einer Sinterverbundkrone. Der Verbundbrand erfolgt hierbei bei 850 °C.

Für keramische Werkstoffe mit niedriger Eigenfestigkeit (z. B. leuzitverstärkte Keramiken) wird ein Konvergenzwinkel von 12° in Verbindung mit einer Stufenpräparation und gerundeter Innenkante als besonders geeignet angesehen. Dabei müssen die Mindestschichtstärken (1,0 mm zirkulär und 1,5 mm okklusal) streng eingehalten und bei der Präparation berücksichtigt werden (Abb. 14). Für Lithium-Disilikat-Keramiken werden ähnliche Präparationsrichtlinien vorgeschlagen, wobei die zirkuläre Mindestschichtstärke bei 0,8 mm und die okklusale Mindestschichtstärke bei 1,5 mm liegen.

Befestigung

Das Befestigungsprotokoll richtet sich nach der Präparation und der Eigenfestigkeit der Keramik. So lassen sich Vollkronen aus Lithiumdisilikat und Zirkoniumdioxidgerüsten nach werkstoffkundlichen Gesichtspunkten konventionell mit herkömmlichen Zementen befestigen. Kapselpräparate (z. B. Ketac Cem, 3M ESPE, Seefeld) sind hier

aufgrund des exakten Mischungsverhältnisses bestens geeignet. Keramiken mit geringer Eigenfestigkeit benötigen das Verbundsystem mit dem natürlichen Zahn, um ausreichende Stabilität zu gewährleisten (Abb. 15 und 16).

Eine ausführliche Tabelle als Anhaltspunkt für die materialspezifischen Indikationsfreigaben der verschiedenen vollkeramischen Materialtypen kann in der Redaktion angefordert werden.

Ausblick

Neue Fertigungsverfahren im Bereich des vollkeramischen Zahnersatzes werden derzeit von mehreren Herstellern angeboten bzw. getestet. An erster Stelle sei hier das von der Firma WIELAND Dental + Technik (Pforzheim) angebotene CAO-Verfahren (Computer Aided Overpress) genannt, bei dem neben der Gerüststruktur aus Zirkoniumdioxid eine Verblendhülle aus rückstandslos verbrennbarem Kunststoff im CAD/CAM-Verfahren hergestellt wird. Anschließend werden beide Komponenten zusammen gewachst, eingebettet und aufgeheizt, um dann in der klassischen Überpresstechnik fertiggestellt zu werden. Dieses Vorgehen erspart dem Labor das Aufwachsen der Verblendung für das Überpressverfahren, sodass damit eine kosteneffizientere Herstellung möglich ist.

Eine noch höhere Effektivität verspricht die so genannte „Sinterverbundkrone“ (SVK®), bei der ebenfalls die beiden Kronenbestandteile, Gerüst und Verblendung, im CAD/CAM-Verfahren hergestellt werden. Allerdings geschieht dies bereits mit den definitiven Materialien, welche anschließend im sogenannten „Sinterverbundbrand“ zusammengefügt werden (Abb. 17–20). Dieses Verfahren befindet sich derzeit im Prototypenstadium und könnte auch für die Herstellung von Brücken



Abb. 20: Eingegliederte Sinterverbundkrone auf Zahn 46.

geeignet sein. Erste materialwissenschaftliche Untersuchungen deuten auf das hohe mechanische Potenzial der Sinterverbundkrone hin. ◀

autoren



OA Dr. med. dent.

Florian Beuer

1994–2000 Studium

der Zahnheilkunde

an der Ludwig-Maxi-

milians-Universität München; 2000 Approbation; seit 2004 Funktionsoberarztfunktion an der Poliklinik für zahnärztliche Prothetik der Ludwig-Maximilians-Universität München; 2005 Zertifizierung zum Spezialisten für Implantologie (DGI); 2006 Dritter Preis Dental Talent Award (3M ESPE); 2007–2008 Visiting Professor am Pacific Dental Institute in Portland, Oregon, USA; 2008 Förderpreis der Bayerischen Landes Zahnärztekammer 2007



Josef Schweiger

Jahrgang 1963, 1984

bis 1988 Ausbildung

zum Zahntechniker

beim Dentallabor

Singer in Traunstein; seit 1999 Laborleiter an der Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik der Ludwig-Maximilians-Universität München, Arbeitsschwerpunkte: Vollkeramik, Implantatprothetische Versorgungen, CAD/CAM-Technologie, Generative Fertigungsverfahren (Rapid Prototyping); Mitglied der AG-Keramik, Initiator der Arbeitsgruppe Vollkeramik München; Mitwirkung beim Curriculum CAD/CAM („CAD/CAM-Führerschein“).