

Implantieren im atrophierten Kiefer ohne Knochenabbau und Augmentation?

Teil 2 – Das implantologische Konzept und das chirurgische Handling

Im ersten Teil wurden die zugrunde liegenden biologischen, material- und verfahrenstechnischen Parameter besprochen, die als Voraussetzung anzusehen sind, soll bei transversal reduziertem Knochenangebot ohne umfangreiche augmentative und risikobehaftete Eingriffe der ortsständige Knochen erhalten werden. In diesem Teil werden das chirurgische Protokoll und die dafür notwendigen implantattechnischen Prämissen beschrieben.

Dr. med. dent. Jörg Munack, M.Sc./Hannover

■ In einer Praxisstudie wurde an 42 Patienten mit 107 gesetzten Implantaten untersucht, ob es mit dem neuen NobelActive™ Implantat (Nobel Biocare, Köln), möglich ist, im atrophierten Knochen vergleichbare klinische, periimplantäre und röntgenologische Ergebnisse zu erzielen wie mit herkömmlichen implantologischen Therapieverfahren. Alle in die Studie aufgenommenen Patienten waren allgemeinmedizinisch anamnestisch unauffällig. Eine Patientenselektion hat nicht stattgefunden. Das Studiendesign wird im dritten Teil noch näher erläutert.

Das implantologische Konzept

Entscheidender Faktor für eine langzeitstabile Osseointegration bei reduziertem Knochenangebot und das chirurgische Handling sind das Makro- und Mikrodesign des Implantats. Das untersuchte NobelActive™ Implantat weist hier einige Merkmale auf, die in ihrer Summe gemäß den Herstellerangaben zum gewünschten Ergebnis führen sollen.

Im Einzelnen sind das unter anderem (Abb. 1a und 1b):

- ein schmal zulaufender koronaler Bereich
- ein wurzelförmiger Implantatkörper
- ein doppelläufiges Kompressionsgewinde
- eine oxidierte, mäßig raue und poröse Implantatoberfläche (TiUnite®, Nobel Biocare, Köln)
- Kammern für das Rückwärtsschneiden sowie
- ein selbstschneidendes Gewinde an der Implantatspitze.

Dabei erlauben die Kammern für das Rückwärtsschneiden eine graduelle Erweiterung des Knochens bei unterdimensionierter Aufbereitung. Das Kompressionsgewinde soll speziell in Regionen mit verminderter Knochenqualität die gewünschte Primärstabilität gewährleisten. Die durch das selbstschneidende Gewinde gewonnenen vitalen Knochenspänel lagern sich aufgrund des sich verjüngenden Schulterbereichs druckfrei und stabil an, wodurch eine optimierte Weichgewebeunterstützung bewirkt werden soll. Zudem kann aufgrund des spezifischen Gewindedesigns mit den doppelläufigen,

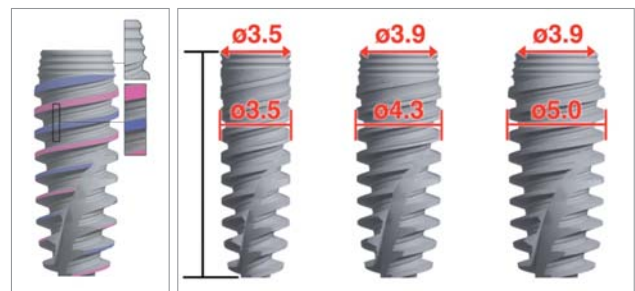


Abb. 1a: Die primären Merkmale in grafischer Darstellung: schmal zulaufende Implantatschulter, TiUnite-Oberfläche, Doppelgewinde, wurzelförmiger Implantatkörper und apikale Schneide. – **Abb. 1b:** Verjüngter Implantatthals im Verhältnis zum Durchmesser des Implantatkörpers.

um 180° versetzten scharfen Schneiden noch während des Insertionsvorganges chirurgisch die Richtung des Implantates verändert werden, ohne dass Achsrichtung und Position durch die vorhandenen Alveolen oder den Bohrschacht beeinträchtigt werden. Die Implantatposition kann so gewählt werden, dass der bukkale Knochen und das vestibuläre Weichgewebe passiv gestützt werden. Auf der osseokonduktiven TiUnite®-Implantatoberfläche migrieren die Präosteoblasten, verankern sich in den Poren, differenzieren sich zu Osteoblasten und sondern Knochenmatrix ab. Durch die anschließende Mineralisierung der Knochenmatrix bildet sich direkt auf der Implantatoberfläche Geflechtknochen, der zu Lamellenknochen reift. Die anfängliche Primärstabilität geht damit ohne nennenswerte Stabilitätslücke in die Sekundärstabilität über. Durch diesen Effekt haben auch



Abb. 2a und b: Darstellung eines transversal reduzierten Implantationsbereiches vor und nach Bildung eines Mukoperiostlappens. Der Mukoperiostlappen ist so angelegt, dass er die Implantatschulter jederzeit überdecken kann.

TRI® – Performance Concept

Ein revolutionäres neues Implantatkonzept in der Implantologie

TRI
dental implants



«One size fits all.»
1 prothetische Plattform –
3 Implantatdurchmesser
3.75 – 4.1 – 4.7

1. TRI® – Friction

Die Friktionsbasierte Verbindung garantiert maximale Stabilität und eliminiert den Microgap für ein optimiertes Platform Switch Konzept.

2. TRI® – Bone Adapt

Das patentierte konische Implantatkonzept ermöglicht die ideale Knochenadaptation in den jeweiligen Knochensegmenten (s. rechts).

3. TRI® – Grip

Das apikale Ende des Implantates gewährt ein Maximum an Primärstabilität, besonders vorteilhaft bei Sofortimplantationen.

Bild: TRI-Vent Implantat (TV41B11), 115 Euro

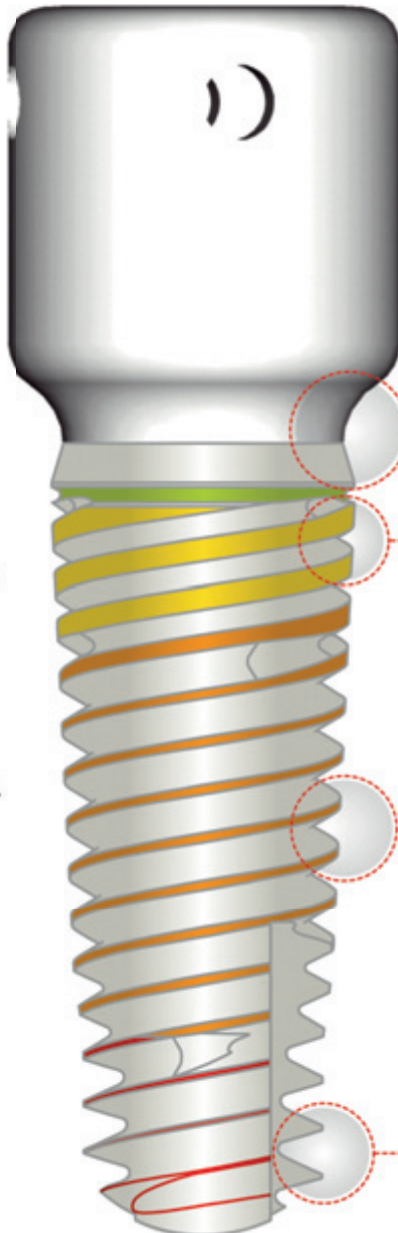


Bild: Esthetic Heding Collar (TVHC 50-60-A)
für eine direkte Weichgewebsfixation
45 Euro



© Dr. M. Steigmann

TRI® Soft Tissue Interface
Konsistentes Emergenzprofil integriert
in allen prothetischen Komponenten

Crestales Gewindedesign
BoneShifting® zum Schutz des
cortikalen Knochens

Body Gewindedesign
Ideale Adaptation an die Spongiosa
mit maximalem Knochenkontakt

Apikales Gewindedesign
Unmittelbare Schneidewirkung
mit scharfem apikalen Gewinde

Optimiertes Hard und Soft Tissue Management
mit dem patentierten TRI Dental Implant System.
Designed in Switzerland. Made in Germany.

TRI Performance Days 2011


19.10.2011 München
02.11.2011 Köln
16.11.2011 Stuttgart
23.11.2011 Hamburg

Referenten:

Dr. Marius Steigmann (Institut Steigmann)
Dr. Achim Sieper (All Dente)
Dr. Drazen Tadic (Botiss Dental)
Tobias Richter (TRI Dental Implants)



Jetzt GRATIS testen!

Through Research Innovative
www.tri-implants.com
Gratis Infoline: 00800 3313 3313

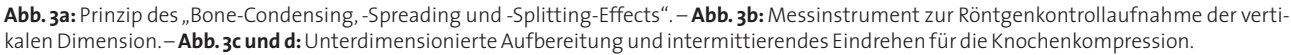

mit den scharfen Schneiden und dem doppelläufigen Gewinde wird der Knochen durch ein intermittierendes, vorsichtiges Ein- und Zurückdrehen (in und aus dem Knochenfach) mit jeder Eindrehbewegung komprimiert. Es kommt sukzessive zu einem „Knochen-Condensing-Spreading-Splitting“ Effekt. Die Gefahr einer Nekrose besteht bei diesem Vorgehen nicht (Abb. 3a–d). Wird das Implantat sodann ein bis zwei Umdrehungen rückwärtsschneidend herausgedreht, werden durch die apikalen Bohrschneiden vitale Knochenpartikel aus der Kieferregion gelöst und entlang der Implantatoberfläche von der apikalen Schneide nach koronal bis in die isokrestalen Areale transportiert. So gewonnener autologer Knochen gilt als Goldstandard für eine Defektversorgung. Durch den Spreading- und Splitting-Effekt des NobelActive™ Implantats kann es vestibulär im Kortikalisbereich zu einem Frakturspalt kommen, der sich jedoch aufgrund des sich koronal verjüngenden Implantathalses

In der Literatur⁴ wird empfohlen, die Bildung eines Mukoperiostlappens zu vermeiden. So könne das Risiko einer, vor allem im anterioren Oberkieferbereich, unerwünschten Knochenresorption und/oder Gingivarezession gesenkt werden. Bei stark transversal atrophierten Alveolarfortsätzen ist die Bildung eines Mukoperiostlappens jedoch des Öfteren unumgänglich, um den Knochen ausreichend darstellen zu können. Der Zugang erfolgte über einen Trapezlappen mit paramarginaler Schnittführung und einer mesialen sowie distalen Entlastung. Die Inzision auf dem Alveolarkamm wurde so weit oral versetzt, dass die Implantatschulter stets vom Mukoperiostlappen bedeckt wurde (Abb. 2 a–b). Alle Implantate wurden isokrestal inseriert. Abweichend vom herstellerseitigen Bohrprotokoll wurden die Implantatlager jedoch unterdimensioniert aufbereitet. Im Gegensatz zur ablativen Implantatbett-aufbereitung, bei der durch Einsatz von Bohr- oder Fräswerkzeugen ein zum Implantat kongruentes Implantatlager geschaffen wird, wird bei diesem nonablativen, knochenverdichtenden (Condensing) und knochenspreizenden (Spreading) Vorgehen der Effekt der lateralen Kondensation genutzt.^{7,8,9} Denn durch den wurzelförmigen, sich zur Implantatschulter hin erweiternden Implantatkörper verhält sich das Implantat beim Eindrehen wie ein Osteotom mit Gewinde. Aufgrund des Gewindedesigns

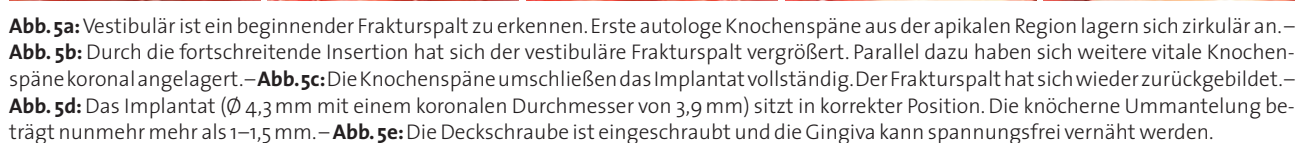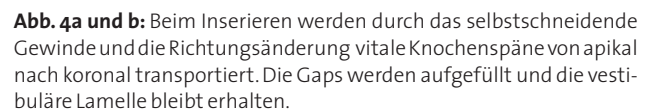

Gesteuerte Knochen- und Geweberegeneration:

Biomaterialien made in Germany



**CompactBone B. made in Germany
exklusiv von Dentegris**

**BoneProtect Membrane aus porcinem
Kollagen, 3–4 Monate Barrierefunktion**




CompactBone B.




BoneProtect
Membrane

- Weites Indikationsspektrum für Implantologie, Parodontologie und Oralchirurgie
- 20 Jahre klinische Erfahrung aus der Ortho- und Traumatologie
- Großes Produktportfolio: Knochenaufbaumaterial, Kollagenmembrane, Kollagenvliese
- Röntgenopak (bessere Visualisierung)
- Volumenstabil, einfache Verarbeitung
- Kontrollierte und gesicherte Qualität
- Preisattraktiv und wirtschaftlich

 **Dentegris**
DENTAL IMPLANT SYSTEM

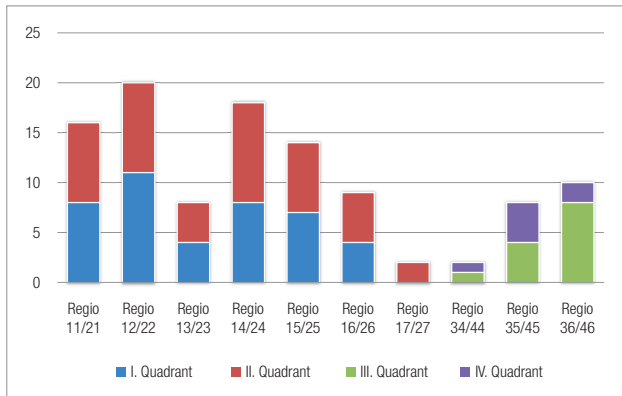

Tab. 1: Übersicht der Positionierung der gesetzten Implantate.

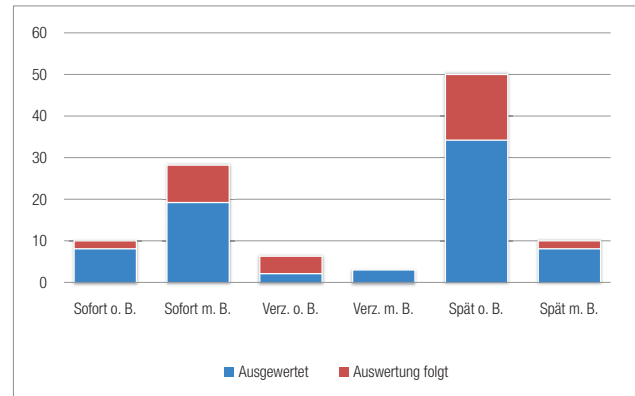

Tab. 2: Verteilung der Implantate nach Belastungsart.

wieder zurückbildet bzw. durch den koronal angelagerten autologen Knochen verfüllt wird (Abb. 4a–b und 5a–e).

Zusätzliche augmentative Maßnahmen

Von den insgesamt 107 Implantaten konnten 41 Implantate ohne zusätzliche augmentative Verfahren eingebracht werden. Hierfür genügte die über die unterdimensionierte Aufbereitung und die intermittierende Einbringung gewonnene Menge an autologem Knochen. Die Implantatschultern waren zirkulär von mindestens einem Millimeter Knochen ummantelt. Jedoch können gerade beim transversal reduzierten Alveolar-kamm sowie bei lokalen Knochendefekten zusätzlich kleine augmentative Maßnahmen notwendig werden. Wo daher die Ausbeute an autologem Knochen zu gering war, wurden zusätzlich augmentative Materialien (Bio-Oss®) ein- oder angelagert.

87 Implantate wurden in den Oberkiefer und 20 in den Unterkiefer eingebracht. Das Konzept der Sofortimplantation ohne Belastung wurde bei zehn Implantaten und mit Belastung bei 28 Implantaten angewandt. Verzögert ohne Belastung heilten sechs Implantate und mit Belastung drei Implantate ein. Das Konzept der Spätimplantation ohne Belastung wurde bei 50 Implantaten favorisiert, weitere zehn spätinsetierte Implantate wurden sofort belastet (Tab. 1 und 2).



Abb. 6: Das Implantat-Interface mit konischer Innenverbindung, Innen-sechskant und Platform-Switch.

funktionaler Sofortbelastung ein. Im ersten Fall hatte die provisorische Restauration keinen Kontakt zur Gegenbe-zahnung, Laterotrusions- und Protrusionsbewegungen wurden vermieden. Im zweiten Fall hatte das Provisorium geringfügige antagonistische Kontakte, jedoch auch hierbei unter Vermeidung von Laterotrusions- und Protrusionsbewegungen. Die provisorischen Restaurationen bei der Sofortversorgung und Sofortbelastung wurden stets temporär zementiert (TempBond, Kerr).

Prothetische Versorgung

Einer der wichtigsten Parameter für den Erfolg von Im-plantaten ist der periimplantäre, über das physiologische Maß hinausgehende Knochenabbau. Der als physio-logisch anzusehende Knochenabbau ist in seinem Aus-maß implantatsystemspezifisch unterschiedlich und

besonders von den verschiedenen ana-tomischen Ausgangssituationen, den Augmentaten und den operativen Tech-niken und Vorgehensweisen abhängig. Der in der Studie verwendete Implan-tatyp (NobelActive™, Nobel Biocare) hat ein auf diese Anforderungen hin ausge-richtetes Design. Im Detail sind dies ein integriertes Platform Switch für ein opti-mierte Anwachsen der periimplantären Mukosa, eine konische initiale Innenver-bindung für ein dichtes Interface zwis-

chen Implantat und Suprastruktur sowie eine Sechskant-Innenverbindung im unteren Be-reich zur Rotationssicherung des Abutments. ■



Einheilung

Die überwiegende Zahl der gesetzten Implantate heilte gedeckt nach dem Standardprotokoll – mehr als sechs Mo-nate im Ober- und drei Monate im Unterkiefer – ein. Hier-bei wurde die Schleimhaut über dem Implantat komplett verschlossen. Die Provisorien hatten keinen Kontakt zur Schleimhaut an den Stellen, wo sie das Implantat bedeck-ten. Diese Methode bietet den Vorteil geringerer Infektan-fälligkeit. In den Fällen mit augmentativen Maßnahmen (einschließlich externer Sinusbodenelevation) betrug die Einheilphase stets mehr als sechs Monate. Die übrigen Implantate heilten entweder offen ohne oder mit leichter

Der dritte Teil des Studienberichtes mit der Darstellung und Diskussion der Studienergebnisse er-scheint in der Ausgabe 1/2012 des Implantologie Journals.

KONTAKT

Dr. med. dent. Jörg Munack, M.Sc.
ZahnMedizinisches Team am Aegi
Hildesheimer Str. 6, 30169 Hannover
Web: www.zmtaa.de



